

# MiSeqDx Instrument

Referentni priručnik za MOS v4

Ovaj dokument i njegov sadržaj vlasništvo su tvrtke Illumina, Inc. i njezinih povezanih društava („Illumina“) te su namijenjeni isključivo za ugovornu upotrebu klijentima u vezi s proizvodima opisanim u njemu. Dokument i njegov sadržaj ne smiju se upotrebljavati ni distribuirati ni u koju drugu svrhu niti se smiju na neki drugi način prenositi, otkrivati ili reproducirati bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Illumina. Illumina ovim dokumentom ne prenosi nikakve licence zaštićene svojim pravom na patent, žig, autorskim pravom ili običajnim pravom ni slična prava bilo koje treće strane.

Softver vam se licencira prema uvjetima i odredbama Licencnog ugovora za softver za sekvenciranje društva Illumina u zasebnom dokumentu. Ako ne prihvaćate te uvjete i odredbe, Illumina vam ne može licencirati softver te ga ne smijete upotrebljavati ni instalirati.

Kvalificirano i odgovarajuće obučeno osoblje mora se strogo i bez iznimki pridržavati uputa u ovom dokumentu da bi se zajamčila pravilna i sigurna upotreba proizvoda opisanih u njemu. Prije upotrebe proizvoda nužno je s razumijevanjem pročitati cjelokupan sadržaj dokumenta.

AKO UPUTE U DOKUMENTU NE PROČITATE U CIJELOSTI TE IH SE NE PRIDRŽAVATE BEZ IZNIMKI, MOŽE DOĆI DO OŠTEĆENJA PROIZVODA, OZLJEDA KORISNIKA ILI DRUGIH OSOBA TE DO OŠTEĆENJA DRUGE IMOVINE.

ILLUMINA NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA ŠTETE NASTALE USLIJED NEPRAVILNE UPOTREBE PROIZVODA KOJI SU OPISANI U OVOM DOKUMENTU (UKLJUČUJUĆI DIJELOVE TIH PROIZVODA I SOFTVER) NI ZA BILO KOJU UPOTREBU PROIZVODA KOJA NIJE U OPSEGU IZRIČITO ZAPISANIH LICENCI ILI DOPUŠTENJA DOBIVENIH OD DRUŠTVA ILLUMINA U VEZI S KUPČEVOM KUPNOM PROIZVODA.

© 2021 Illumina, Inc. Sva prava pridržana.

Svi su žigovi vlasništvo tvrtke Illumina, Inc. ili svojih vlasnika. Konkretno informacije o žigovima potražite na adresi [www.illumina.com/company/legal.html](http://www.illumina.com/company/legal.html).

Softver sadrži biblioteku SeqAn, za koju Illumina ima licencu te je distribuira pod sljedećom licencom:

Autorsko pravo © 2010., Knut Reinert, FU Berlin, sva prava pridržana. Daljnja distribucija i upotreba u izvorišnom i binarnom obliku uz preinake i bez njih dopuštene su pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

Daljnje distribucije izvorišnog koda moraju sadržavati prethodno navedenu obavijest o autorskom pravu, popis uvjeta te sljedeću izjavu o odricanju odgovornosti.

U dokumentaciju i/ili druge materijale koji se isporučuju uz daljnju distribuciju u binarnom obliku moraju se dodati navedena obavijest o autorskom pravu, popis uvjeta te sljedeća izjava o odricanju odgovornosti.

Tvrtka FU Berlin i ime Knut Reinert te imena suradnika ne smiju se upotrebljavati za promidžbu proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez prethodne konkretne pisane dozvole.

VLASNICI AUTORSKOG PRAVA I SURADNICI OVAJ SOFTVER NUDE „KAKAV JEST“ I BEZ BILO KAKVIH IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH JAMSTAVA, PRI ČEMU SE, MEĐU OSTALIMA, ODRIČU IMPLICIRANA JAMSTVA UTRŽIVOSTI I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. VLASNIK AUTORSKOG PRAVA I SURADNICI NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE SE SMATRATI ODGOVORNIMA ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, PRIMJERNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, MEĐU OSTALIMA, NABAVU ZAMJENSKIH DOBARA ILI USLUGA, GUBITAK MOGUĆNOSTI UPOTREBE PODATAKA ILI DOBITI ODNOSNO PREKID U RADU) BEZ OBZIRA NA RAZLOG NJEZINA NASTANKA TE AKO JE PREMA BILO KAKVOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO UGOVORNOJ, PREMA STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI KAZNENOJ (UKLJUČUJUĆI NEMAR I DRUGO) NA BILO KOJI NAČIN NASTALA USLIJED UPOTREBE OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SU POSTOJALA SAZNAJNA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

# Povijest revizija

Broj dokumenta	Datum	Opis promjene
Broj dokumenta 1000000157953 v00	Studen 2021.	Početno izdanje za MOS v4.0 i Local Run Manager v3.0.

# Sadržaj


Povijest revizija .....	iii
<b>Pregled .....</b>	<b>1</b>
Komponente .....	1
MiSeqDx Software .....	3
Local Run Manager Software .....	5
Potreban prostor na disku .....	5
Pravilnici o ograničenju softvera .....	6
Antivirusni softver .....	6
Način rada za sekvenciranje .....	6
<b>Početak rada .....</b>	<b>8</b>
Pokretanje instrumenta MiSeqDx .....	8
Postavljanje mogućnosti ispiranja nakon obrade .....	9
Postavljanje mogućnosti automatskog pokretanja obrade .....	9
Uključivanje podrške za Illumina Proactive .....	9
Postavljanje preferencija za e-poštu .....	10
Postavljanje zadane lokacije izlazne mape .....	10
Obavezan potrošni materijal .....	11
Skladištenje i rukovanje .....	12
<b>Sekvenciranje .....</b>	<b>13</b>
Uvod .....	13
Trajanje obrade .....	13
Generiranje klastera .....	13
Sekvenciranje .....	13
Analiza .....	13
Priprema spremnika reagensa .....	14
Prijava i slijedenje uputa za sekvenciranje .....	15
Čišćenje protočnog članka .....	16
Umetanje protočnog članka .....	17
Umetanje reagensa .....	19
Nadzor obrade .....	22
Provođenje ispiranja nakon obrade .....	24
<b>Održavanje .....</b>	<b>29</b>
Učestalost održavanja .....	29

Preventivno održavanje .....	29
Provođenje ispiranja radi održavanja .....	29
Provođenje ispiranja u stanju mirovanja .....	32
Isključivanje instrumenta .....	35
<b>Otklanjanje poteškoća .....</b>	<b>36</b>
Uvod .....	36
Grupiranje zapisnika radi otklanjanja poteškoća .....	36
Provođenje provjere sustava .....	37
Pauziranje ili zaustavljanje obrade .....	37
Ručno podizanje dozatora sa spremnika reagensa .....	38
Otklanjanje pogrešaka u postavljanju obrade .....	39
Otklanjanje pogreške zbog neuspješnog očitavanja RFID-a .....	40
Sprječavanje ponovnog pokretanja tijekom obrade .....	41
Otklanjanje poteškoća zbog pogreške protoka .....	41
Testiranje volumena .....	42
Rješavanje pogrešaka s temperaturom hladnjaka reagensa .....	43
Rješavanje pogrešaka analize softvera Local Run Manager .....	43
Konfiguriranje postavki sustava .....	43
<b>Izlazne mape .....</b>	<b>46</b>
Mape obrade .....	46
<b>Kazalo .....</b>	<b>47</b>
<b>Tehnička pomoć .....</b>	<b>50</b>

# Pregled

## Komponente


MiSeqDx se sastoji od sljedećih vanjskih komponenti:

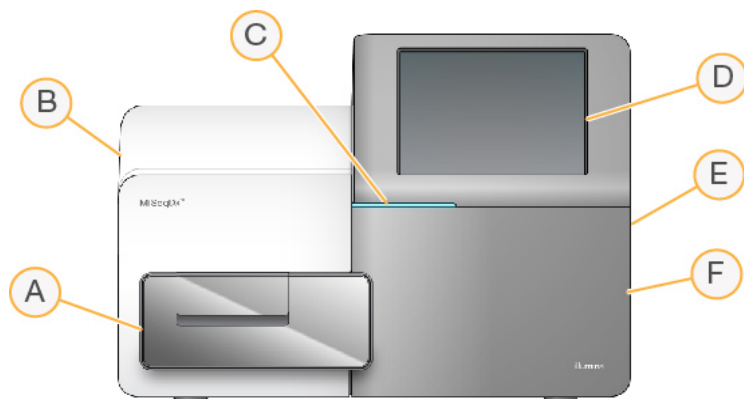

- A. **Odjeljak za protočni članak** – sadrži nosač protočnog članka na kojem se tijekom cijele obrade nalazi protočni članak. Motori nosača protočnog članka pomiču nosač iz zatvorenog optičkog modula radi umetanja protočnog članka te vraćaju nosač kad započne obrada.
- B. **Zatvoreni optički modul** – sadrži optičke komponente koje omogućuju snimanje protočnog članka.
- C. **Traka statusa** – označava status protočnog članka kao spreman za sekvenciranje (zeleni), u obradi (plavi) ili traži pozornost korisnika (narančasti).
- D. **Monitor s dodirnim zaslonom** – prikazuje sučelje upravljačkog softvera za konfiguraciju sustava i postavljanje obrade.
- E. **Vanjski USB priključak** – omogućuju prijenos datoteka i podataka na računalo instrumenta s monitora s dodirnim zaslonom.
- F. **Odjeljak za reagense** – sadrži reagense na odgovarajućim temperaturama, otopine za ispiranje i bocu za iskorištene reagense. Vratašca odjeljka za reagense zatvaraju se putem magnetske brave.

Korisničko sučelje instrumenta MiSeqDx vodi vas kroz korake za postavljanje obrade putem monitora s dodirnim zaslonom. Za umetanje komponenti za obradu potreban je pristup odjeljku za reagense i odjeljku za protočni članak.

## Odjeljak za protočni članak

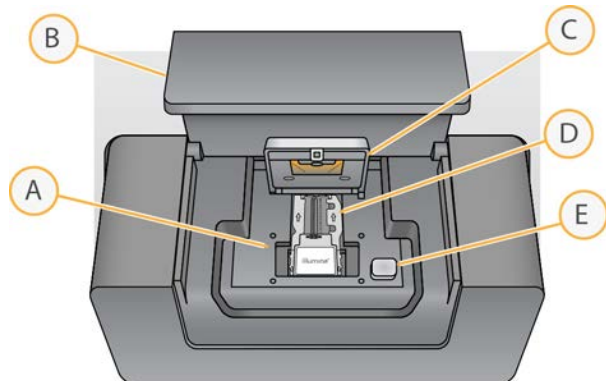


- A. Nosač protočnog članka
- B. Vratašca odjeljka za protočni članak
- C. Zasun protočnog članka
- D. Protočni članak
- E. Gumb za otvaranje zasuna protočnog članka

U odjeljku za protočni članak nalaze se nosač protočnog članka, toplinska stanica te priključci za povezivanje sustava fluida s protočnim člankom. Na nosaču protočnog članka nalazi se protočni članak, a zasun protočnog članka drži protočni članak na mjestu. Kad se zatvori zasun protočnog članka, dvije iglice u blizini šarke zasuna automatski namještaju protočni članak.

Toplinska stanica, koja se nalazi ispod nosača protočnog članka, kontrolira promjene temperature protočnog članka koje su potrebne za generiranje klastera i sekvenciranje.

## Protočni članak

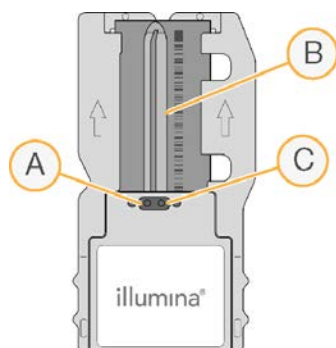


- A. Izlazni priključak
- B. Područje snimanja
- C. Ulazni priključak

Protočni članak MiSeqDx jednokratni je stakleni supstrat na kojem se generiraju klasteri i provodi reakcija sekvenciranja.

Reagensi kroz ulazni priključak ulaze u protočni članak, prolaze kroz jednokanalno područje snimanja, a potom izlaze iz protočnog članka kroz izlazni priključak. Otpad koji izlazi iz protočnog članka provodi se do boce za otpad.

Tijekom obrade sekvenciranjem snimaju se slike jednog kanala na malim područjima snimanja koja se nazivaju pločice.

## Odjeljak za reagense

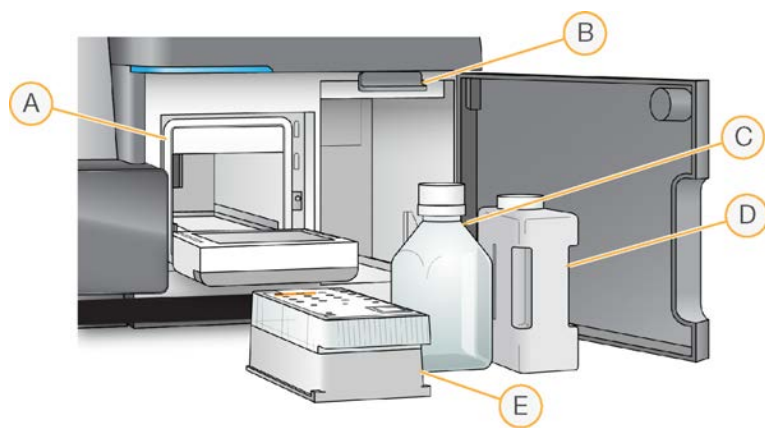

- A. Hladnjak reagensa
- B. Ručka dozatora (prikazana u podignutom položaju)
- C. Boca reagensa MiSeqDx SBS Solution (PR2)
- D. Boca za otpad
- E. Spremnik reagensa

U odjeljku za reagense nalaze se hladnjak reagensa te mjesta za bocu reagensa MiSeqDx SBS Solution (PR2) te bocu za otpad.

Tijekom obrade u hladnjaku reagensa nalazi se jednokratni spremnik reagensa. Tijekom ispiranja instrumenta u hladnjaku reagensa nalazi se plitica za ispiranje. Softver automatski spušta dozatore u svaki bazen spremnika reagensa u određeno vrijeme tijekom obrade, ovisno o postupku koji se provodi.

Desno od hladnjaka reagensa nalaze se dva oblikovana utora za bocu reagensa MiSeqDx SBS Solution (PR2) i bocu za otpad. Ručkom dozatora boce se blokiraju na mjestu te se u svaku bocu spušta odgovarajući dozator.

Reagensi se pumpaju kroz dozatore i vodove za fluide, a potom na protočni članak. Tijekom cijelog postupka otpadni reagens provodi se u bocu za otpad.

## MiSeqDx Software

Softverski paket instrumenta obuhvaća integrirane aplikacije koje obavljaju obrade sekvenciranjem, analizu na instrumentu i druge povezane funkcije.






- **MiSeq Operating Software (MOS)** – upravlja radom instrumenta. Korisničko sučelje softvera MiSeq Operating Software (MOS) vodi vas kroz korake umetanja protočnog članka i reagensa prije započinjanja obrade. Tijekom postupka obrade prikazuje se pregled statistike kvalitete. Taj je softver unaprijed instaliran na instrument i izvodi se na njemu.
- MOS tijekom obrade pomiče nosač protočnog članka, dozira reagense, kontrolira temperature protočnog članka te na protočnom članku snima slike klastera. MOS provodi obradu u skladu s parametrima navedenima u softveru Local Run Manager.
- **Softver Real-Time Analysis (RTA)** – analizira slike i određuje očitane baze te svakoj bazi za svaki ciklus dodjeljuje ocjenu kvalitete. Slike se privremeno pohranjuju u mapu obrade da bi ih RTA mogao obraditi, a potom se, nakon što RTA dovrši analizu, automatski brišu.
- **Softver Local Run Manager** – rješenje integrirano u instrument koje se upotrebljava za stvaranje obrade, praćenje statusa, analizu podataka sekvenciranja i prikaz rezultata. Local Run Manager ujedno prati informacije o uzorku i upravlja dozvolama korisnika. Softver se pokreće na računalu instrumenta, a prikazuje putem web-preglednika. Pročitajte odjeljak [Local Run Manager Software na stranici 5](#).

## Ikone statusa

Kad se instrument inicijalizira ili pokrene, ikona statusa na sučelju upravljačkog softvera pokazuje promjenu stanja. Broj na ikoni označava broj stanja za status.

Kada se promijeni status izvođenja, ikona treperi da bi vas upozorila na to. Odaberite ikonu da bi vam se prikazao opis stanja. Odaberite **Acknowledge** (Prihvati) da biste izbrisali poruku, a zatim **Close** (Zatvori) da biste zatvorili dijaloški okvir.

Vrste poruka koje se prikazuju u prozoru statusa filtrirajte tako da odaberete ikone pri vrhu prozora. Odabirom ikone uključuje se odnosno skriva prikaz određenog stanja.

Ikona statusa	Naziv statusa	Opis
	Status OK (Status je u redu)	Nema promjene. Sustav radi normalno.
	Warning (Upozorenje)	Upozorenja ne zaustavljaju obradu. No na neka je upozorenja potrebno reagirati da bi se mogla nastaviti obrada.
	Error (Pogreška)	Pogreške najčešće zaustavljaju obradu te je uglavnom potrebno nešto poduzeti da bi se obrada mogla nastaviti.

## Indikatori senzora

Tri indikatora senzora pri dnu svakog zaslona korisničkog sučelja prikazuju status komponenti instrumenta.

Slika 1 Indikatori senzora



Indikatori senzora slijeva udesno predstavljaju sljedeće komponente:

- Temperatura hladnjaka reagensa u °C
- Temperatura protočnog članka u °C

## Local Run Manager Software

Softver Local Run Manager integrirano je rješenje na instrumentu za bilježenje uzoraka za obradu, određivanje parametara obrade, nadzor statusa, analiziranje podataka dobivenih sekvenciranjem i prikaz rezultata.

Local Run Manager uz to kontrolira i provjeru autentičnosti korisnika, čime korisnicima dodjeljuje dozvole različitih razina. Dozvole se spremaju u datoteku baze podatka, koju MiSeqDx upotrebljava kao referencu. Local Run Manager može i nadzirati obradu sekvenciranjem. Dodatne informacije sadrži *Referentni priručnik za softver Local Run Manager V3 za MiSeqDx (broj dokumenta 200003931)*.

## Sekvenciranje tijekom analize

Računalni resursi instrumenta MiSeqDx upotrebljavaju se ili za sekvenciranje ili za analizu.

Ako upotrebljavate Local Run Manager i na instrumentu MiSeqDx pokrenete novu obradu sekvenciranjem prije dovršetka sekundarne analize prethodne obrade, pojavit će se dijaloški okvir za potvrdu. Nakon što potvrdite da želite pokretanje nove obrade sekvenciranja, sekundarna će se analiza ranije obrade zaustaviti sve dok se ne dovrši sekvenciranje nove obrade.

Kada novi postupak završi sekvenciranje, sekundarna analiza prethodnog postupka automatski započinje od početka.

## Potreban prostor na disku

Računalo integrirano s instrumentom ima kapacitet prostora za pohranu od otprilike 650 GB.

Softver prije pokretanja obrade provjerava slobodan prostor na disku. Ako na disku nema dovoljno prostora za obradu, prikazuje se upit softvera. U poruci se navodi koliko je prostora na disku potrebno za obradu te koliko je prostora potrebno osloboditi na disku da bi se obrada mogla nastaviti.

Ako se prikaže upit za oslobađanje prostora na disku, premjestite ili izbrišite starije mape obrada, ovisno o tome što je primjereno.

## Pravilnici o ograničenju softvera

Pravilnici o ograničenju softvera (eng. Software Restriction Policies, SRP) u sustavu Windows putem pravila dopuštaju samo pokretanje određenog softvera. SRP pravila za MiSeqDx utemeljena su na certifikatima, nazivima datoteka, nastavcima datoteka i direktorijima.

SRP je po zadanom uključen da bi se spriječilo pokretanje neželjenog softvera na upravljačkom računalu. Samo korisnik koji je sbsadmin može isključiti SRP.

Predstavnik informatičkog odjela ili administrator sustava može prilagoditi razinu sigurnosti dodavanjem i uklanjanjem pravila. Ako je sustav dodan u domenu, lokalni GPO (Group Policy Object) mogao bi automatski izmijeniti pravila i isključiti SRP.

Informacije o konfiguriranju SRP-a potražite u dokumentu [Sigurnost i mreža upravljačkog računala za instrument tvrtke Illumina](#).



### OPREZ

Isključivanjem SRP-a onemogućuje se zaštita koju ta značajka pruža. Promjenom pravila nadjačavaju se zadane zaštite.

## Antivirusni softver

Preporučujemo upotrebu antivirusnog softvera po vlastitom izboru radi zaštite upravljačkog računala instrumenta od virusa. Tijekom instalacije antivirusnog softvera privremeno ćete morati isključiti pravilnike o ograničenju softvera (eng. Software Restriction Policies, SRP) u sustavu Windows.

Informacije o konfiguriranju antivirusnog softvera i SRP-a potražite u dokumentu [Sigurnost i mreža upravljačkog računala za instrument tvrtke Illumina](#).

## Način rada za sekvenciranje

Kad pokrenete instrument, prikazuje se zaslon sustava Windows **Choose an operating system** (Odaberite operacijski sustav). Na zaslonu možete odabrati način rada operacijskog sustava za sekvenciranje koji možete pokrenuti – Research (Istraživanje, RUO) ili Diagnostic (Dijagnostika, Dx). Ako pričekate 10 sekundi, automatski se odabire zadani način rada. Zadani način rada i vrijeme do pokretanja zadanog načina rada možete u bilo kojem trenutku promijeniti.

- Kad odaberete način rada, morate ponovno pokrenuti sustav da biste ga promijenili. Pročitajte odjeljak [Ponovno pokretanje sistemskog softvera na stranici 7](#).
- Kad prijedete iz načina rada RUO u DX ili obrnuto, od vas se traži da pokrenete ispiranje nakon obrade. Stanje ispiranja ne zadržava se prelaskom iz jednog načina rada u drugi.

Da biste mogli aktivirati značajku ponovnog pokretanja, potrebna je administratorska razina pristupa sustavu Windows ili dozvola za istraživački način rada za običnog korisnika.



## OPREZ

Mogućnost Restore Factory OS (RUO/Dx) (Vraćanje tvorničkog operacijskog sustava (RUO/Dx)) namijenjena je samo terenskim servisnim inženjerima tvrtke Illumina. Tom se mogućnošću trajno brišu svi podaci s pogona C te se operacijski sustav vraća u izvorno stanje. Ako se odabere ta mogućnost, terenski servisni inženjer tvrtke Illumina mora vratiti funkcionalnost sustava. Postupak vraćanja nakon pokretanja ne može se otkazati.

Tu mogućnost odaberite samo ako vam to preporuči terenska servisna služba tvrtke Illumina.

### Da biste promijenili zadani način pokretanja, učinite sljedeće:

1. Odaberite **Change defaults or choose other options** (Promjena zadanih postavki i odabir drugih mogućnosti).
2. Na zaslonu Options (Mogućnosti) odaberite **Choose a default operating system** (Odaberite zadani operacijski sustav).
3. Odaberite željenu mogućnost pokretanja.
4. Odaberite strelicu za natrag da biste se vratili na zaslon **Options** (Mogućnosti).

### Da biste promijenili vrijeme do pokretanja zadanog načina rada, učinite sljedeće:

1. Odaberite **Change defaults or choose other options** (Promjena zadanih postavki i odabir drugih mogućnosti).
2. Na zaslonu Options (Mogućnosti) odaberite **Change the timer** (Promjena mjerača vremena).
3. Na zaslonu Change the timer (Promjena mjerača vremena) odaberite željeno vrijeme.
4. Odaberite strelicu za natrag da biste se vratili na zaslon **Options** (Mogućnosti).



## UPOZORENJE

U sustavu Windows 10 nakon pokretanja u sustav se može prijaviti samo onaj korisnik koji ga je ponovno pokrenuo.

## Ponovno pokretanje sistemskog softvera

Odaberite naredbu Reboot (Ponovno pokreni sustav) da biste ponovno pokrenuli sistemski softver. Softver nije potrebno ponovno pokretati tijekom redovnog održavanja.

- Na glavnom izborniku odaberite **Reboot** (Ponovno pokreni sustav)


# Početak rada

## Pokretanje instrumenta MiSeqDx

1. Postavite prekidač na poledini instrumenta u položaj | (uključeno).

**NAPOMENA** Da bi imao najbolje performanse, instrument nemojte isključivati. No ako morate isključiti instrument, pročitajte odjeljak [Isključivanje instrumenta na stranici 35](#). Pričekajte *najmanje* 60 sekundi prije nego što prekidač napajanja vratite u položaj ON (Uključeno).

Slika 2 Položaj prekidača napajanja

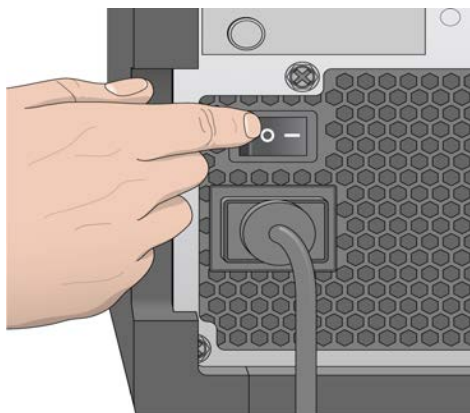

2. Pričekajte da se sustav učita, a zatim odaberite operacijski sustav i prijavite se u njega. Po potrebi zatražite korisničko ime i lozinku od administratora ustanove. Dodatne informacije o mogućnostima za operacijski sustav i za način rada za sekvenciranje pročitajte u odjeljku [Način rada za sekvenciranje na stranici 6](#). Kad se operacijski sustav učita, pokrenut će se MiSeq Operating Software (MOS) te automatski inicijalizirati sustav. Imajte na umu da se MOS pokreće automatski kad je odabran način rada samo za istraživanje.
3. Ako upotrebljavate Local Run Manager i omogućeno je upravljanje korisnicima, prijavite se s pomoću korisničkog imena i lozinke za Local Run Manager te odaberite **Next** (Dalje).

## Postavljanje mogućnosti ispiranja nakon obrade

Nakon svake obrade obavezno je isprati instrument. Softver neće dopustiti postavljanje sljedeće obrade dok se ne obavi ispiranje. Mogućnošću ispiranja nakon obrade određuje se kakvo će se ispiranje obavljati po zadanom. Ispiranje nakon obrade traje otprilike 30 minuta. Ispiranje radi održavanja traje otprilike 90 minuta.

1. Na glavnom izborniku odaberite **System Settings** (Postavke sustava).
2. Odaberite karticu Run Settings (Postavke obrade).
3. Odaberite **Post Run Wash** (Ispiranje nakon obrade) ili **Maintenance Wash** (Ispiranje radi održavanja).

## Postavljanje mogućnosti automatskog pokretanja obrade

MiSeqDx se može konfigurirati tako da obradu sekvenciranjem započne automatski nakon što uspješno provede automatsku provjeru. Za konfiguriranje te značajke potreban je pristup razine administratora softvera Local Run Manager.

1. Na glavnom izborniku odaberite **System Settings** (Postavke sustava).
2. Odaberite karticu Run Settings (Postavke obrade).
3. Potvrdite okvir **Start run after pre-run check. Do not prompt for confirmation.** (Pokreni obradu nakon provjere prije obrade. Nemoj tražiti potvrdu.)  
Ako je ta postavka onemogućena, obradu je potrebno pokrenuti ručno nakon provjere prije obrade.

## Uključivanje podrške za Illumina Proactive

1. Na glavnom izborniku odaberite **System Settings** (Postavke sustava).
2. Odaberite karticu Proactive.
3. Odaberite **Turn on Illumina Proactive Support** (Uključi podršku za Illumina Proactive) da biste omogućili uslugu praćenja Illumina Proactive.

Dok je ta postavka uključena, podaci o radu instrumenta šalju se tvrtki Illumina. Na temelju tih podataka Illumina lakše otklanja poteškoće i prepoznaje potencijalne pogreške, što omogućuje proaktivno održavanje i minimiziranje praznog hoda instrumenta. Dodatne informacije o prednostima te usluge potražite u dokumentu *Illumina Proactive Technical Note (Tehnička napomena o usluzi Illumina Proactive, broj dokumenta 1000000052503)*.

Ta usluga:

- ne šalje podatke o sekvenciranju
- zahtijeva vezu instrumenta s mrežom koja ima pristup internetu

- po zadanom je isključena; da biste uključili tu uslugu, omogućite postavku **Turn on Illumina Proactive Support** (Uključi podršku za Illumina Proactive).
4. Na padajućem popisu odaberite regiju u kojoj se nalazi glavno računalo s kojim bi se instrument trebao povezivati.

## Postavljanje preferencija za e-poštu

MiSeqDx se može konfigurirati tako da e-poštom šalje obavijest kad se dovrši analiza RTA, kad se dovrši sekundarna analiza na instrumentu ili ako dođe do kritične pogreške softvera MiSeqDx. Konfiguracija se najčešće postavlja tijekom instalacije instrumenta MiSeqDx. Za upotrebu te značajke potreban je pristup razine administratora softvera Local Run Manager.

1. Na glavnom izborniku odaberite **System Settings** (Postavke sustava).
2. Odaberite karticu **Email Notifications** (Obavijesti e-poštom).
3. Unesite sljedeće podatke:
  - **Local SMTP email server address** (Adresa lokalnog SMTP poslužitelja e-pošte) – s pomoću zaslonske tipkovnice unesite adresu lokalnog SMTP poslužitelja e-pošte. Taj podatak, ako je potrebno, zatražite od administratora ustanove.
  - **Sender address** (Adresa e-pošte pošiljatelja) – s pomoću zaslonske tipkovnice unesite adresu e-pošte pošiljatelja. To može biti vaša adresa e-pošte ili neka druga adresa e-pošte koja je određena za slanje obavijesti e-poštom. Naziv domene u adresi e-pošte pošiljatelja mora biti jednak adresi poslužitelja e-pošte.
  - **Recipient addresses** (Adrese e-pošte primatelja) – s pomoću zaslonske tipkovnice unesite adrese e-pošte svih primatelja obavijesti. Adrese e-pošte razdvojite zarezom. Odaberite **Test** da biste poslali probnu poruku e-pošte primateljima obavijesti.
  - **Notify via email when** (Šalji obavijest e-poštom kada) – potvrdite okvir uz svaki događaj obrade za koji želite da aktivira slanje obavijesti.

## Postavljanje zadane lokacije izlazne mape

Mapa Output instrumenta MiSeqDx određuje zadanu lokaciju za izlazne datoteke analize. Mape se mogu nalaziti na lokalnoj mreži ili na računalu instrumenta. Promijenite zadanu mapu za izlazne datoteke u mrežnu lokaciju da biste ih mogli dijeliti ili pohraniti na dulje vrijeme.

Za konfiguriranje te značajke potreban je pristup razine korisnika administratora softvera Local Run Manager.

1. Na glavnom izborniku odaberite **System Settings** (Postavke sustava).
2. Odaberite karticu Run Settings (Postavke obrade).
3. U polje Output Folder (Izlazna mapa) unesite put do lokacije mape.  
Pazite da unesete cijeli UNC put, npr. \\VasPoslužitelj\Put\IzlaznaMapa.

**UPOZORENJE**

Ako upotrebljavate mapirani pogon kao što je, primjerice Z:\IzlaznaMapa, analiza obrade sekvenciranjem neće se dovršiti.

## Obavezan potrošni materijal

### Potrošni materijal za sekvenciranje

Potrošni materijal za sekvenciranje koji je potreban za obrade na instrumentu MiSeqDx isporučuje se zasebno u kompletu za *in vitro* dijagnostiku.

### Potrošni materijal koji mora pribaviti korisnik

Prije započinjanja obrade provjerite imate li na raspolaganju sljedeći potrošni materijal koji mora pribaviti korisnik.

Potrošni materijal	Svrha
Alkoholne maramice sa 70 % izopropila ili 70 % etanola	Čišćenje stakla i nosača protočnog članka
Laboratorijske maramice koje ne ispuštaju mnogo dlačica	Čišćenje nosača protočnog članka
Papir za leće, 4 x 6 inča	Čišćenje protočnog članka
Epruvete MiSeq	Ispiranje voda predložaka (nije obavezno)
NaOCl, 5 %	Ispiranje voda predložaka (nije obavezno)
Tween 20	Pranje instrumenta
Pinceta, kvadratnog vrha, plastična (nije obavezno)	Vađenje protočnog članka iz spremnika za transport protočnog članka
Voda, laboratorijske kvalitete	Pranje instrumenta



## Smjernice za vodu laboratorijske kvalitete

Za postupke na instrumentu uvijek upotrebljavajte vodu ili deioniziranu vodu laboratorijske kvalitete. Nipošto nemojte upotrebljavati vodu iz slavine.

Upotrebljavajte samo sljedeće razrede vode ili njihove ekvivalente:

- deionizirana voda
- Illumina PW1
- voda od 18 megaoma (MΩ)
- voda Milli-Q
- voda Super-Q
- voda za primjenu u molekularnoj biologiji

## Skladištenje i rukovanje

Element	specifikacije
Temperatura	Transport i skladištenje: od -10 °C do 40 °C Radni uvjeti: od 19 °C do 25 °C
Vlažnost	Transport i skladištenje: vlaga bez kondenzacije Radni uvjeti: relativna vlažnost 30 – 75 % (bez kondenzacije)

# Sekvenciranje

## Uvod

Da biste pokrenuli obradu na instrumentu MiSeqDx, slijedite korake za postavljanje opisane u ovom poglavlju. Kad započne obrada, više nije potrebno ništa činiti.

Nakon dovršetka postupka sekvenciranja pokrenite ispiranje instrumenta.

## Trajanje obrade

Trajanje obrade temelji se na broju izvršenih ciklusa. Ovisno o verziji reagensa MiSeqDx instrument može provesti obradu sekvenciranjem uparenih krajeva u do 2 x 301 ciklus sekvenciranja.

## Broj ciklusa u očitavanju

Broj ciklusa koji se provedu u očitavanju veći je za jedan od broja analiziranih ciklusa. Taj je dodatni ciklus nužan za izračune pri određivanju faza i predfaza.

Tijekom obrade uparenih krajeva u 150 ciklusa, primjerice, provedu se očitavanja 151 ciklusa (2 x 151), tj. ukupno 302 ciklusa plus eventualni ciklusi za očitavanje indeksa. Na kraju obrade analizira se 2 x 150 ciklusa.

## Generiranje klastera

Tijekom generiranja klastera pojedinačne molekule DNK-a vežu se za površinu protočnog članka, a potom amplifikacijom uz nadsvođivanje formiraju klasterne.

## Sekvenciranje

Klasteri se nakon generiranja snimaju uz kombinaciju LED-a i filtara koja je specifična za svaki od četiri fluorescentno označena dideoksinukleotida. Nakon dovršetka snimanja jedne pločice protočnog članka članak se pomiče radi ekspozicije sljedeće pločice. Taj se postupak ponavlja dok se ne snime sve pločice. Nakon analize slika softver provodi primarnu analizu, koja obuhvaća određivanje baza, filtriranje i ocjenjivanje kvalitete.

## Analiza

Kad obrada završi, automatski se pokreće softver za analizu Local Run Manager radi provođenja sekundarne analize.

Sekundarnu analizu moguće je putem internetske veze nadzirati s drugog računala ako se to računalo nalazi u istoj mreži kao MiSeqDx. Pročitajte *Referentni priručnik za softver Local Run Manager v3 za MiSeqDx (broj dokumenta 200003931)*.

## Priprema spremnika reagensa

U sljedećim se uputama opisuje postupak otapanja spremnika reagensa s pomoću vodene kupke sobne temperature.

1. Otopite spremnik reagensa u vodenoj kupki s dovoljnom količinom deionizirane vode sobne temperature da se postolje spremnika reagensa u nju potopi do crte za maksimalnu količinu vode otisnute na spremniku reagensa. Pazite da voda ne prelazi crtu za maksimalnu količinu vode.
2. Izvadite spremnik reagensa iz spremišta u kojem je temperatura od  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
3. Postavite spremnik reagensa u vodenu kupku s dovoljnom količinom deionizirane vode sobne temperature da se potopi postolje spremnika reagensa. Pazite da voda ne prelazi crtu za maksimalnu količinu vode koja je otisnuta na spremniku reagensa.

Slika 3 Crta za maksimalnu količinu vode



4. Pričekajte da se spremnik reagensa potpuno otopi u vodenoj kupki sobne temperature. Vrijeme otapanja traje približno od 60 do 90 minuta, ovisno o vrsti spremnika reagensa. Dodatne informacije potražite u uputama za analizu.
5. Izvadite spremnik iz vodene kupke te nježno njime lupkajte po radnoj površini da biste izbacili vodu iz postolja spremnika. Osušite postolje spremnika. Pazite da voda ne poprska gornji dio spremnika reagensa.

## Provjera spremnika reagensa

1. Deset puta preokrenite spremnik reagensa da biste pomiješali otopljene reagense, a potom provjerite jesu li svi položaji otopljeni.
2. Provjerite jesu li reagensi na položajima 1, 2 i 4 potpuno pomiješani i bez precipitata.

**NAPOMENA** Za pravilno sekvenciranje ključno je da reagensi u spremniku budu potpuno otopljeni i pomiješani.

3. Nježno spremnikom lupkajte po radnoj površini da biste smanjili broj mjehurića zraka u reagensima.

**NAPOMENA** Cjevčice dozatora MiSeqDx koje služe za aspiraciju reagensa nalaze se na dnu svakog bazena, pa je važno da u spremnicima nema mjehurića zraka.

4. Spremnik reagensa držite na ledu do šest sati ili ga odložite u spremište u kojem je temperatura od 2 °C do 8 °C (do šest sati) dok ne budete spremni za postavljanje obrade. Da biste postigli najbolje rezultate, odmah umetnite uzorak i postavite obradu.

## Umetanje biblioteka uzoraka u spremnik


Kad se spremnik reagensa potpuno otopi te bude spreman za upotrebu, u spremnik možete umetnuti uzorke.

1. Zasebnim, čistim i praznim vrhom pipete od 1 ml probijte zatvarač od folije na bazenu spremnika reagensa označenom **Load Samples** (Umetnite uzorke).

**NAPOMENA** Nemojte probijati nijedan drugi položaj reagensa. Drugi položaji reagensa probit će se automatski tijekom obrade.

2. Pipetom prenesite 600 µl biblioteka uzoraka pripremljene razrijeđene biblioteke amplikona (DAL) u bazen **Load Samples** (Umetnite uzorke). Nemojte dirati zatvarač od folije.
3. Nakon umetanja uzorka provjerite da u bazenu nema mjehurića zraka. Ako ima mjehurića, nježno lupnite spremnikom po radnoj površini da bi mjehurići izašli.

Slika 4 Umetanje biblioteka

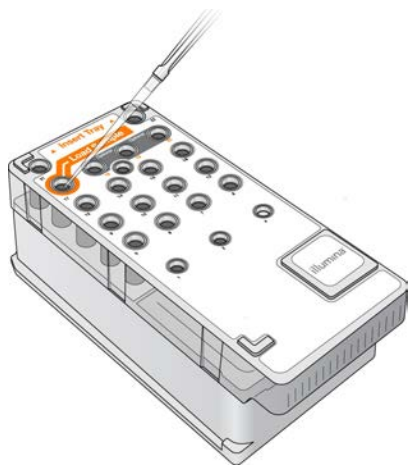

4. Nastavite s koracima za postavljanje obrade s pomoću sučelja softvera MiSeq Operating Software (MOS).

## Prijava i slijeđenje uputa za sekvenciranje

1. Na početnom zaslonu odaberite **Sequence** (Sekvenciranje).

2. Ako se prikaže zaslom za prijavu, unesite odgovarajuće korisničke vjerodajnice pa odaberite **Next** (Dalje). Nakon prijave ponovno odaberite **Sequence** (Sekvenciranje).
3. Na popisu odaberite obradu.
4. [neobavezno] Odaberite **Preview Samples** (Pretpregled uzoraka) da biste vidjeli popis uzoraka u obradi.
5. Odaberite **Next** (Dalje).
6. Slijedite upute za umetanje protočnog članka i reagensa te postavite obradu (opisano u sljedećim odjeljcima).

## Čišćenje protočnog članka

Protočni članak uronjen je u pufer za čuvanje u spremniku za protočni članak.

1. Navucite novi par rukavica bez pudera.
2. Plastičnom hvataljkom primite protočni članak za postolje plastičnog spremnika te ga izvadite iz spremnika protočnog članka.

Slika 5 Vađenje protočnog članka



3. Nježno ispirite protočni članak vodom laboratorijske kvalitete pazeći da od viška soli temeljito isperete i stakleni i plastični spremnik.


Višak soli može utjecati na to kako protočni članak sjeda na instrument. Ako se soli osuše u području za snimanje, to može utjecati i na snimke.

Slika 6 Ispiranje protočnog članka



4. Temeljito posušite protočni članak i spremnik rupčićem za objektivu koji ne ispušta dlačice uz osobit oprez na dijelovima oko crne brtve na priključku protočnog članka (prikazanoj na sljedećoj ilustraciji). Nježno tupkanjem posušite područje brtve i staklo uz nju.

Slika 7 Priključci i brtva protočnog članka

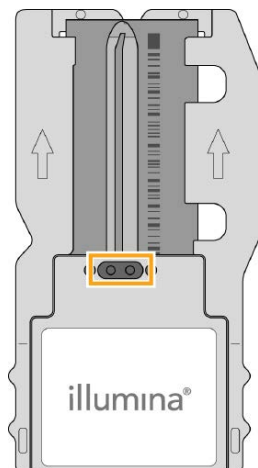

5. Staklo protočnog članka očistite alkoholnom maramicom. Pazite da na staklu ne ostane pruga, otisaka prstiju ni dlačica ili vlakana s rupčića.

**NAPOMENA** Alkoholnu maramicu nemojte upotrebljavati na brtvi priključka protočnog članka.

Slika 8 Sušenje protočnog članka




6. Višak alkohola posušite rupčićem za čišćenje objektivu koji ne ispušta dlačice.
7. Provjerite da ništa ne zatvara priključke protočnog članka te da brtva čvrsto sjedi oko priključaka protočnog članka.  
Ako vam se čini da brtva ne sjedi na mjestu, nježno je pritisnite i vratite na mjesto oko priključaka protočnog članka.

## Umetanje protočnog članka


1. Podignite vratašca odjeljka za protočni članak pa pritisnite gumb za otpuštanje koji se nalazi desno od zasuna protočnog članka. Otvorit će se zasun protočnog članka.

Slika 9 Otvaranje zasuna protočnog članka

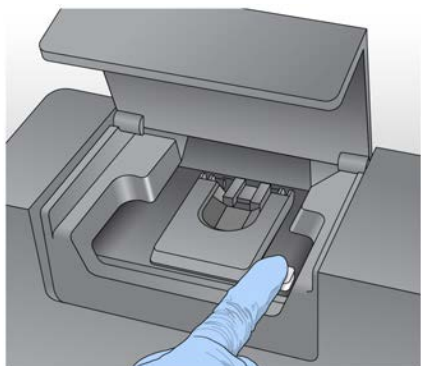


2. Provjerite da u nosaču protočnog članka nema dlačica. U slučaju prisutnosti dlačica ili neke druge prijavštine, očistite nosač protočnog članka alkoholnom maramicom ili pak rupčićem navlaženim etanolom ili izopropanolom. Oprezno brišite površinu nosača protočnog članka dok ne bude čista i suha.
3. Držeći ga za rubove spremnika protočnog članka, postavite protočni članak na nosač.

Slika 10 Postavljanje protočnog članka na nosač

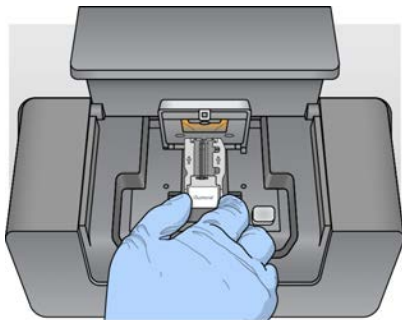

4. Nježno pritisnite zasun protočnog članka prema dolje da biste ga zatvorili preko protočnog članka. Kad se zatvori zasun protočnog članka, iglice za poravnanje postavit će protočni članak na odgovarajuće mjesto. Kad se zasun zatvori, čut ćete škljocaj.

Slika 11 Zatvaranje zasuna protočnog članka

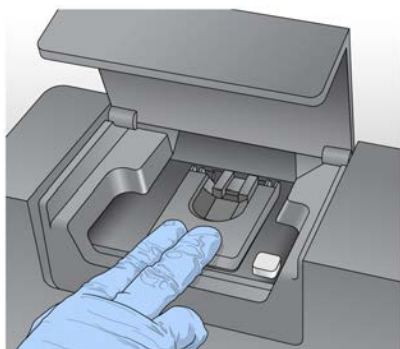

5. Ako softver ne prepozna RFID protočnog članka, pročitajte odjeljak [Otklanjanje pogreške zbog neuspješnog očitavanja RFID-a na stranici 40](#).

**NAPOMENA** Ako nije moguće očitati RFID, identifikacijske podatke možete unijeti ručno. No softver dopušta pogrešku samo na jednoj od triju komponenti označenih RFID-om (protočni članak, spremnik reagensa, MiSeqDx SBS Solution (PR2)) tijekom obrade za in vitro dijagnostiku. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otklanjanje pogreške zbog neuspješnog očitavanja RFID-a na stranici 40](#).


6. Zatvorite vratašca odjeljka za protočni članak.
7. Odaberite **Next** (Dalje).

## Umetanje reagensa

### Umetanje SBS otopine za MiSeqDx (PR2) i provjera boce za otpad

1. Izvadite bocu reagensa MiSeqDx SBS Solution (PR2) iz spremišta u kojem je temperatura od 2 °C do 8 °C. Preokrenite je da biste je promiješali, a potom uklonite poklopac.
2. Otvorite vratašca odjeljka za reagense.
3. Podižite ručku dozatora dok se ne blokira na mjestu.
4. Izvadite bocu za ispiranje pa umetnite bocu reagensa MiSeqDx SBS Solution (PR2).


Slika 12 Umetnite bocu reagensa MiSeqDx SBS Solution (PR2).

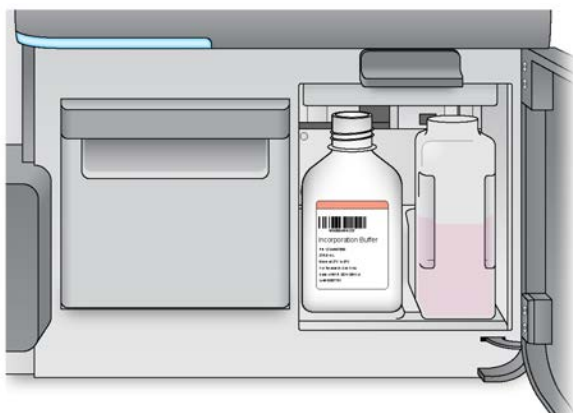

5. Sadržaj boce za otpad ispraznite u odgovarajući spremnik.
6. Polako spuštajte ručku dozatora. Pazite da se dozatori spuste u bocu reagensa MiSeqDx SBS Solution (PR2) i bocu za otpad.



Slika 13 Spuštanje ručke dozatora

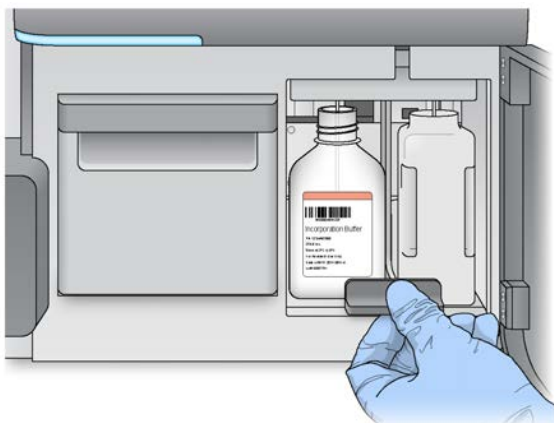

7. Ako softver ne prepozna RFID boce reagensa MiSeqDx SBS Solution (PR2), pročitajte odjeljak [Otklanjanje pogreške zbog neuspješnog očitavanja RFID-a na stranici 40](#).

**NAPOMENA** Ako nije moguće očitati RFID, identifikacijske podatke možete unijeti ručno. No softver dopušta pogrešku samo na jednoj od triju komponenti označenih RFID-om (protočni članak, spremnik reagensa, MiSeqDx SBS Solution (PR2)) tijekom obrade za in vitro dijagnostiku. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otklanjanje pogreške zbog neuspješnog očitavanja RFID-a na stranici 40](#).

8. Odaberite **Next** (Dalje).

## Umetanje spremnika reagensa

1. Otvorite vratašca hladnjaka reagensa.

**NAPOMENA** Vratašca hladnjaka reagensa nemojte tijekom duljeg vremena ostavljati otvorena.

2. Spremnik reagensa držite za kraj na kojem se nalazi oznaka Illumina te ga gurajte u hladnjak reagensa dok ne zastane.

Slika 14 Umetanje spremnika reagensa



3. Zatvorite vratašca hladnjaka reagensa.
4. Ako softver ne prepozna RFID spremnika reagensa, pročitatje odjeljak [Otklanjanje pogreške zbog neuspješnog očitavanja RFID-a na stranici 40](#).

**NAPOMENA** Ako nije moguće očitati RFID, identifikacijske podatke možete unijeti ručno. No softver dopušta pogrešku samo na jednoj od triju komponenti označenih RFID-om (protočni članak, spremnik reagensa, MiSeqDx SBS Solution (PR2)) tijekom obrade za in vitro dijagnostiku. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otklanjanje pogreške zbog neuspješnog očitavanja RFID-a na stranici 40](#).

5. Da biste pokrenuli obradu, odaberite neku od sljedećih mogućnosti.
  - Ako sustav nije konfiguriran tako da se nakon uspješne provjere automatski pokrene, odaberite **Start Run** (Započni obradu).
  - Ako sustav jest konfiguriran tako da se nakon uspješne provjere automatski pokrene, obrada sekvenciranjem započinje automatski. Ne morate biti prisutni. No ako tijekom provjere dođe do bilo kakve pogreške, obrada ne započinje automatski.

**NAPOMENA** Ako temperatura hladnjaka reagensa nije unutar navedenog raspona, obrada sekvenciranjem možda se neće moći pokrenuti. Pročitatje odjeljak [Rješavanje pogrešaka s temperaturom hladnjaka reagensa na stranici 43](#).

## Važna napomena prije pokretanja obrade



### UPOZORENJE

**MiSeqDx je osjetljiv na vibracije. Dodirivanjem instrumenta nakon pokretanja obrade možete negativno utjecati na rezultate sekvenciranja.**

Kad umetnete spremnik reagensa i zatvorite vratašca odjeljka za reagense, nemojte otvarati vratašca odjeljka za protočni članak ni odjeljka za reagense. Monitor instrumenta dodirujte isključivo radi pauziranja obrade. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Pauziranje obrade na stranici 37](#).



### UPOZORENJE

Prije pokretanja obrade obavezno zatvorite sve datoteke na instrumentu MiSeqDx i nemojte otvarati datoteke tijekom obrade.


## Nadzor obrade

Tijekom obrade nadzirite pojedinosti o obradi putem zaslona Sequencing (Sekvenciranje) na instrumentu. Zaslون Sequencing (Sekvenciranje) služi samo za prikaz.

Za nadzor obrade na daljinu možete upotrebljavati i Local Run Manager ako je instrument povezan s istom mrežom.

U softveru Local Run Manager pokazuje se tijek obrade i informacije o sekvenciranju (ukupan broj klastera, % klastera koji prolaze filter, postotak 1. i 2. očitavanja >= Q30 te posljednji ocijenjeni ciklus). Dodatne informacije potražite u odjeljku [Local Run Manager Software na stranici 5](#).

1. Na zaslonu instrumenta Sequencing (Sekvenciranje) nadzirite tijekom obrade, intenzitete i rezultate kvalitete koji se prikazuju.
  - **Run Progress** (Tijek obrade) – na traci statusa prikazuje tijek obrade te navodi broj dovršenih ciklusa.
  - **Intensity** (Intenzitet) – prikazuje vrijednost intenziteta klastera u 90. centilu za svaku pločicu. Grafički prikaz u području Intensity (Intenzitet) predstavlja broj pločica koje se snimaju.
  - Ako se snima samo gornja površina protočnog članka, prikazuje se grafikon s jednim stupcem.
  - Ako se snimaju gornja i donja površina protočnog članka, prikazuje se grafikon s dva stupca.

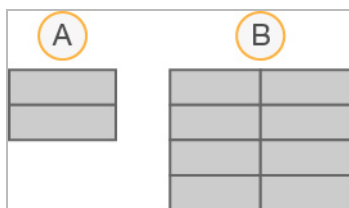

- A. Označava dvije pločice, samo gornja površina
- B. Označava četiri pločice, gornja i donja površina

- **Q-Score All Cycles** (Ocjena kvalitete za sve cikluse) – prikazuje prosječni postotak baza ocjene kvalitete (Q-score) veće od Q30. Ocjena kvalitete služi za predviđanje vjerojatnosti za pogrešno očitavanje baza. Ocjene kvalitete izračunavaju se nakon 25. ciklusa.

Ocjena kvalitete	Vjerojatnost pogrešnog očitavanja baza
Q40	1 : 10.000
Q30	1 : 1000
Q20	1 : 100
Q10	1 : 10

- **Cluster Density (K/mm<sup>2</sup>)** (Gustoća klastera (K/mm<sup>2</sup>)) – prikazuje broj klastera po četvornom milimetru za obradu. U optimalnom slučaju očekivana je gustoća klastera 800 K/mm<sup>2</sup>.

**NAPOMENA** Čistoća otkrivanja baza omjer je intenziteta najjačeg signala podijeljenog sa zbrojem dvaju najjačih signala. Ako tijekom prvih 25 ciklusa više od jednog otkrivanja baza ima vrijednost čistoće manju od 0,6, očitavanja ne prolaze filter kvalitete.

- **Estimated Yield (Mb)** (Procijenjen prinos (Mb)) – prikazuje predviđeni broj baza očitanih tijekom obrade koji se mjeri u megabazama. Ti se podaci prikazuju tek nakon 25. ciklusa.
2. Kad završi obrada, prikazuje se gumb Next (Dalje). Prije nastavka pregledajte rezultate na zaslonu Sequencing (Sekvenciranje).

**NAPOMENA** Zaslon Sequencing (Sekvenciranje) prikazuje se dok ne odaberete Next (Dalje). Nakon što odaberete Next (Dalje), povratak na zaslon Sequencing (Sekvenciranje) više nije moguć.

3. Odaberite **Next** (Dalje) da biste zatvorili zaslon Sequencing (Sekvenciranje) i nastavili na ispiranje nakon obrade.

## Generiranje predloška

Softver Real-Time Analysis (RTA) upotrebljava prva četiri ciklusa obrade sekvenciranjem za generiranje predložaka. Generiranje predložaka postupak je kojim se definiraju pozicije klastera preko cijele površine protočnog članka prema položaju koordinata X i Y.

Nakon generiranja predloška položaja klastera slike koje se snimaju tijekom sljedećeg ciklusa snimanja poravnavaju se u odnosu na predložak. Izdvajaju se intenziteti pojedinačnih klastera u sva četiri kanala boja nukleotida te se od normaliziranih intenziteta klastera stvaraju očitavanja baza.

## Metrika obrade

Metrika obrade prikazuje se na zaslonu Sequencing (Sekvenciranje) u različitim trenucima tijekom obrade. Tijekom koraka za generiranje klastera ne prikazuje se metrika.

Nakon početka sekvenciranja prikazuje se sljedeća metrika u navedenim ciklusima:

Ciklus	Mjerni podatak
Ciklus 1 – 4	Intenzitet
Ciklus 4 – 25	Intenzitet i gustoća klastera
Od ciklusa 25 do dovršetka obrade	Intenzitet, gustoća klastera, % prolaznosti kroz filtar, prinos i ocjene kvalitete

## Provođenje ispiranja nakon obrade

Ispiranje nakon obrade standardno je ispiranje instrumenta koje se obavlja između postupaka sekvenciranja. Nakon dovršetka obrade sekvenciranjem obavezno provedite ispiranje instrumenta. Slijedite upute softvera za umetanje komponenti za ispiranje te provođenje ispiranja. Ispiranje nakon obrade traje približno 20 minuta.

Ispiranje pokrenite odmah nakon obrade. Ispiranje instrumenta obavezno je da bi se mogla postaviti sljedeća obrada. Da biste ispiranje nakon obrade proveli u nekom drugom trenutku, a ne izravno nakon obrade, ispiranje pokrenite s pomoću naredbe na zaslonu Perform Wash (Provođenje ispiranja).

Redovitim ispiranjima instrumenta jamče se dosljedne performanse zbog sljedećeg:

- ispiru se svi ostaci reagensa iz vodova za fluide i dozatora
- sprječava se nakupljanje i kristaliziranje soli na vodovima za fluide i dozatorima
- sprječava se križna kontaminacija iz prethodne obrade.

Imate mogućnost provesti i ispiranje nakon obrade koje obuhvaća ispiranje voda predložaka otopinom natrijeva hipoklorita (NaOCl). To ispiranje traje približno 30 minuta. Pročitajte odjeljak [Postupak uz ispiranje voda predložaka na stranici 26](#).

**NAPOMENA** Iskorišteni protočni članak ostavite na instrumentu. Za ispiranje instrumenta, u instrument mora biti umetnut protočni članak.

#### **Potrošni materijal koji mora pribaviti korisnik**

- Tween 20 (Sigma-Aldrich, kataloški broj P7949)
- Voda laboratorijske kvalitete
- NaOCl (upotrebljava se za ispiranje nakon obrade koje obuhvaća ispiranje voda predložaka)
- Epruveta MiSeq (broj dijela MS-102-9999) (za ispiranja nakon obrade koja obuhvaćaju ispiranje voda predložaka)

#### **Postupak**

1. S pomoću sredstva Tween 20 i vode laboratorijske kvalitete na sljedeći način pripremite svježu otopinu za ispiranje:
  - a. Dodajte 5 ml 100-postotnog sredstva Tween 20 u 45 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 10-postotnu otopinu sredstva Tween 20.
  - b. Dodajte 25 ml 10-postotnog sredstva Tween 20 u 475 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 0,5-postotnu otopinu sredstva Tween 20 za ispiranje.
  - c. Promiješajte je tako da je nekoliko puta preokrenete.
2. Na sljedeći način pripremite komponente za pranje uz svježu 0,5-postotnu otopinu sredstva za ispiranje Tween 20:
  - a. U svaki bazen plitice za ispiranje dodajte 6 ml sredstva za ispiranje.
  - b. Dodajte 350 ml otopine za ispiranje u bocu za ispiranje od 500 ml.
3. Na zaslonu za ispiranje koji se prikazuje nakon obrade odaberite **Start Wash** (Pokreni ispiranje). Softver će automatski podići dozatore u hladnjaku reagensa. Prije nastavka pričekajte nekoliko sekundi da se dozatori podignu do kraja.

*Nemojte* odabrati **Perform optional template line wash** (Provedi neobavezno ispiranje voda predložaka) na zaslonu za ispiranje nakon obrade. Za ispiranje voda predložaka potreban je drukčiji postupak. Pročitajte odjeljak [Postupak uz ispiranje voda predložaka na stranici 26](#).
4. Otvorite vratašca odjeljka za reagense i vratašca hladnjaka reagensa pa izvucite iskorišteni spremnik reagensa iz hladnjaka.
5. Gurnite pliticu za ispiranje do kraja u hladnjak reagensa pa zatvorite vratašca hladnjaka reagensa.
6. Podižite ručku dozatora ispred boce reagensa SBS Solution (PR2) i boce za otpad dok se ne blokira na mjestu.
7. Uklonite bocu reagensa MiSeqDx SBS Solution (PR2) te je zamijenite bocom za ispiranje.

**NAPOMENA** Bocu reagensa MiSeqDx SBS Solution (PR2) bacite nakon svake obrade. Nemojte upotrebljavati preostalu MiSeqDx SBS Solution (PR2).

- Uklonite bocu za otpad te njezin sadržaj na odgovarajući način odložite u otpad. Vratite bocu za otpad u odjeljak za reagense.



#### UPOZORENJE

**Ovaj skup reagensa sadrži potencijalno opasne kemikalije. Uslijed udisanja, gutanja te dodira s kožom i očima može doći do tjelesnih ozljeda. Nosite zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za oči, rukavice i laboratorijsku kutu prikladnu za rizik od izlaganja. Iskorištenim reagensima rukujte kao kemijskim otpadom i zbrinite ih u skladu s odgovarajućim regionalnim, nacionalnim i lokalnim zakonima i propisima. Dodatne informacije o zaštiti okoliša, zdravlju i sigurnosti potražite na sigurnosno-tehničkom listu (SDS-u) na web-mjestu [support.illumina.com/sds.html](http://support.illumina.com/sds.html).**

- Polako spustite ručku dozatora da bi se dozatori spustili u bocu za ispiranje i bocu za otpad.
- Zatvorite vratašca odjeljka za reagense.
- Odaberite **Next** (Dalje). Započet će ispiranje nakon obrade.

Nakon ispiranja iskorišteni protočni članak, pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje s ostatkom otopine za ispiranje ostavite na instrumentu.

**NAPOMENA** Dozatori ostaju na donjem položaju, što je normalno. Neiskorištenu otopinu za ispiranje ostavite u plitici za ispiranje i boci za ispiranje da se dozatori ne bi osušili te da zrak ne bi ušao u sustav.


## Postupak uz ispiranje voda predložaka

- S pomoću sredstva Tween 20 i vode laboratorijske kvalitete na sljedeći način pripremite svježu otopinu za ispiranje.
  - Dodajte 5 ml 100-postotnog sredstva Tween 20 u 45 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 10-postotnu otopinu sredstva Tween 20.
  - Dodajte 25 ml 10-postotnog sredstva Tween 20 u 475 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 0,5-postotnu otopinu sredstva Tween 20 za ispiranje.
  - Promiješajte je tako da je pet puta preokrenete.
- S pomoću vode laboratorijske kvalitete na sljedeći način pripremite svježu otopinu NaOCl za ispiranje.
  - Dodajte 36 µl 5-postotnog NaOCl u 864 µl vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti razrijeđenje NaOCl u omjeru 1 : 25.
  - Dodajte 50 µl razrijeđenog NaOCl u omjeru 1 : 25 u 950 µl vode laboratorijske kvalitete u epruveti MiSeq (broj dijela MS-102-9999).

**NAPOMENA** Važno je upotrebljavati točnu koncentraciju NaOCl. Obavezno provjerite postotak koncentracije NaOCl na naljepnici proizvoda. Ako je koncentracija prevelike, generiranje klastera prilikom sljedećih obrada možda neće uspjeti. Ako vam nije dostupan 5-postotni NaOCl, napravite 1 ml otopine 0,01-postotnog NaOCl u vodi laboratorijske kvalitete. NaOCl *nemojte* upotrebljavati prilikom ispiranja radi održavanja ni prilikom ispiranja u stanju mirovanja.

3. Na sljedeći način pripremite komponente za pranje uz svježju otopinu za ispiranje.
  - a. U svaki bazen plitice za ispiranje dodajte 6 ml sredstva za ispiranje.
  - b. Dodajte 350 ml otopine za ispiranje u bocu za ispiranje od 500 ml.
4. Epruvetu MiSeq s 0,01-postotnom otopinom NaOCl za ispiranje postavite na položaj 17 na plitici za ispiranje tako da vrat epruvete bude u ravnini s pliticom. Tom epruветom zamijenite otopinu za ispiranje koja se sastoji od sredstva Tween 20 i vode laboratorijske kvalitete na položaju 17.

Slika 15 Epruveta MiSeq na položaju 17 u plitici za ispiranje

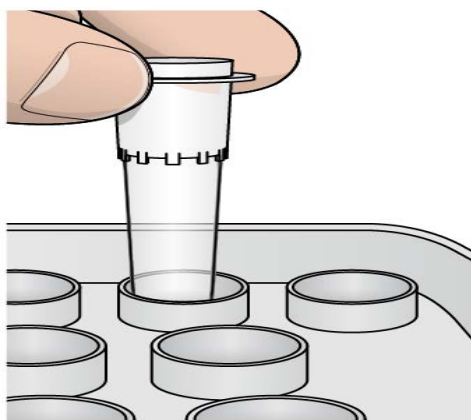

**NAPOMENA** Pazite da epruветu MiSeq s NaOCl u pliticu postavite isključivo na položaj 17. U slučaju umetanja epruvete na neki drugi položaj generiranje klastera prilikom sljedećih obrada možda neće uspjeti, a može se i oštetiti sustav fluida instrumenta MiSeqDx.

5. Nakon dovršetka obrade odaberite **Start Wash** (Pokreni ispiranje). Softver će automatski podići dozatore u hladnjaku reagensa.
6. Odaberite **Perform optional template line wash** (Provedi neobavezno ispiranje voda predložaka) na zaslonu Post-Run Wash (Ispiranje nakon obrade).
7. Otvorite vratašca odjeljka za reagense i vratašca hladnjaka reagensa pa izvucite iskorišteni spremnik reagensa iz hladnjaka.
8. Gurnite pliticu za ispiranje do kraja u hladnjak reagensa pa zatvorite vratašca hladnjaka reagensa.
9. Podižite ručku dozatora ispred boce PR2 i boce za otpad dok se ne blokira na mjestu.



10. Uklonite bocu PR2 te je zamijenite bocom za ispiranje.
11. Uklonite bocu za otpad te njezin sadržaj na odgovarajući način odložite u otpad. Vratite bocu za otpad u odjeljak za reagense.



#### UPOZORENJE

**Ovaj skup reagensa sadrži potencijalno opasne kemikalije. Uslijed udisanja, gutanja te dodira s kožom i očima može doći do tjelesnih ozljeda. Nosite zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za oči, rukavice i laboratorijsku kutu prikladnu za rizik od izlaganja. Iskorištenim reagensima rukujte kao kemijskim otpadom i zbrinite ih u skladu s odgovarajućim regionalnim, nacionalnim i lokalnim zakonima i propisima. Dodatne informacije o zaštiti okoliša, zdravlju i sigurnosti potražite na sigurnosno-tehničkom listu (SDS-u) na web-mjestu [support.illumina.com/sds.html](http://support.illumina.com/sds.html).**

12. Polako spustite ručku dozatora da bi se dozatori spustili u bocu za ispiranje i bocu za otpad.
13. Zatvorite vratašca odjeljka za reagense.
14. Odaberite **Next** (Dalje). Započet će ispiranje nakon obrade.

Nakon ispiranja iskorišteni protočni članak, pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje s ostatkom otopine za ispiranje ostavite na instrumentu.

**NAPOMENA** Dozatori ostaju na donjem položaju, što je normalno. Neiskorištenu otopinu za ispiranje ostavite u plitici za ispiranje i boci za ispiranje da se dozatori ne bi osušili te da zrak ne bi ušao u sustav.

# Održavanje

## Učestalost održavanja

Aktivnosti održavanja opisane u ovom poglavlju provodite prema intervalima navedenima u sljedećim tablicama.

Tablica 1 Održavanje tijekom normalnog rada

Aktivnost	Svaki mjesec	Prema potrebi
Ispiranje radi održavanja	X	
Ispiranje u stanju mirovanja		Radi pripreme za razdoblje neaktivnosti ( $\geq 7$ dana neupotrebe)
Isključivanje instrumenta		X

Tablica 2 Održavanje tijekom neaktivnosti ( $\geq 7$  dana neupotrebe)

Aktivnost	Svaki mjesec	Prema potrebi
Ispiranje u stanju mirovanja	X	
Isključivanje instrumenta		X

## Preventivno održavanje

Illumina preporučuje provođenje jednog preventivnog održavanja svake kalendarske godine. Ako niste pod servisnim ugovorom, obratite se voditelju odnosa s korisnicima za regiju ili službi za tehničku podršku tvrtke Illumina da biste dogovorili servis za preventivno održavanje uz naplatu.

## Provođenje ispiranja radi održavanja

Ispiranje radi održavanja provodite svakih 30 dana da bi se zajamčile optimalne performanse instrumenta. Ispiranje radi održavanja traje približno 90 minuta. Ispiranje se sastoji od tri koraka kojima se temeljito ispire sustav otopinom za ispiranje koja se sastoji od vode laboratorijske kvalitete i sredstva Tween 20.

Instrument možete konfigurirati tako da se između orada provodi ispiranje radi održavanja, a ne ispiranje nakon obrade. Pročitajte odjeljak [Postavljanje mogućnosti ispiranja nakon obrade na stranici 9](#).

### Potrošni materijal koji mora pribaviti korisnik

- Tween 20 (Sigma-Aldrich, kataloški broj P7949)
- Voda laboratorijske kvalitete



### OPREZ

Nakon umetanja plitice za ispiranje te prije pokretanja ispiranja obavezno zatvorite vratašca hladnjaka reagensa. Tim se korakom sprječava ozljeda do koje bi moglo doći ako vam se ruke nađu na putu dozatora tijekom njihova spuštanja.

## Postupak

1. Provjerite je li u instrument umetnut iskorišteni protočni članak.
2. Na početnom zaslonu odaberite **Perform Wash** (Provedi ispiranje).
3. Na zaslonu Perform Wash (Provođenje ispiranja) odaberite **Maintenance Wash** (Ispiranje radi održavanja). Softver će automatski podići dozatore u hladnjaku reagensa.

**NAPOMENA** Za svaki korak ispiranja upotrebljavajte svježu otopinu za ispiranje. Ponovnom upotrebom otopine za ispiranje iz prethodnog ispiranja može se vratiti otpad u vodove za fluide.

## Provođenje prvog ispiranja

1. S pomoću sredstva Tween 20 i vode laboratorijske kvalitete na sljedeći način pripremite svježu otopinu za ispiranje:
  - a. Dodajte 5 ml 100-postotnog sredstva Tween 20 u 45 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 10-postotnu otopinu sredstva Tween 20.
  - b. Dodajte 25 ml 10-postotnog sredstva Tween 20 u 475 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 0,5-postotnu otopinu sredstva Tween 20 za ispiranje.
  - c. Promiješajte je tako da je nekoliko puta preokrenete.
2. Na sljedeći način pripremite komponente za pranje uz svježu 0,5-postotnu otopinu sredstva za ispiranje Tween 20:
  - a. U svaki bazen plitice za ispiranje dodajte 6 ml sredstva za ispiranje.
  - b. Dodajte 350 ml otopine za ispiranje u bocu za ispiranje od 500 ml.
3. Umetnite pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje u instrument:
  - a. Otvorite vratašca odjeljka za reagense i vratašca hladnjaka reagensa pa izvucite iskorišteni spremnik reagensa ili pliticu za ispiranje iz hladnjaka.
  - b. Gurajte pliticu za ispiranje u hladnjak reagensa dok se ne zaustavi. Zatvorite vratašca hladnjaka reagensa.

- c. Podižite ručku dozatora ispred boce reagensa MiSeqDx SBS Solution (PR2) i boce za otpad dok se ne blokira na mjestu pa zamijenite bocu reagensa MiSeqDx SBS Solution (PR2) bocom za ispiranje.

**NAPOMENA**    Bocu reagensa MiSeqDx SBS Solution (PR2) bacite nakon svake obrade.  
Nemojte upotrebljavati preostali reagens MiSeqDx SBS Solution (PR2).

- d. Uklonite bocu za otpad te njezin sadržaj na odgovarajući način odložite u otpad. Vratite bocu za otpad u odjeljak za reagense.
  - e. Polako spustite ručku dozatora da bi se dozatori spustili u bocu za ispiranje i bocu za otpad.
  - f. Zatvorite vratašca odjeljka za reagense.
4. Odaberite **Next** (Dalje). Započet će prvo ispiranje.

### Provođenje drugog ispiranja

1. S pomoću sredstva Tween 20 i vode laboratorijske kvalitete na sljedeći način pripremite svježu otopinu za ispiranje:
  - a. Dodajte 5 ml 100-postotnog sredstva Tween 20 u 45 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 10-postotnu otopinu sredstva Tween 20.
  - b. Dodajte 25 ml 10-postotnog sredstva Tween 20 u 475 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 0,5-postotnu otopinu sredstva Tween 20 za ispiranje.
  - c. Promiješajte je tako da je nekoliko puta preokrenete.
2. Nakon dovršetka prvog ispiranja izvadite pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje te bacite preostalu tekućinu za ispiranje.
3. Na sljedeći način ponovno napunite komponente za pranje svježom 0,5-postotnom otopinom sredstva za ispiranje Tween 20:
  - a. U svaki bazen plitice za ispiranje dodajte 6 ml sredstva za ispiranje.
  - b. Dodajte 350 ml otopine za ispiranje u bocu za ispiranje od 500 ml.
4. Na sljedeći način umetnite pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje:
  - a. Gurajte pliticu za ispiranje u hladnjak reagensa dok se ne zaustavi. Zatvorite vratašca hladnjaka reagensa.
  - b. Umetnite bocu za ispiranje pa polako spustite ručku dozatora da bi se dozatori spustili u bocu za ispiranje i bocu za otpad.
  - c. Zatvorite vratašca odjeljka za reagense.
5. Odaberite **Next** (Dalje). Započet će drugo ispiranje.

## Provođenje završnog ispiranja

1. S pomoću sredstva Tween 20 i vode laboratorijske kvalitete na sljedeći način pripremite svježu otopinu za ispiranje:
  - a. Dodajte 5 ml 100-postotnog sredstva Tween 20 u 45 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 10-postotnu otopinu sredstva Tween 20.
  - b. Dodajte 25 ml 10-postotnog sredstva Tween 20 u 475 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 0,5-postotnu otopinu sredstva Tween 20 za ispiranje.
  - c. Promiješajte je tako da je nekoliko puta preokrenete.
2. Nakon dovršetka drugog ispiranja izvadite pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje te bacite preostalu tekućinu za ispiranje.
3. Na sljedeći način ponovno napunite komponente za pranje svježom 0,5-postotnom otopinom sredstva za ispiranje Tween 20:
  - a. U svaki bazen plitice za ispiranje dodajte 6 ml sredstva za ispiranje.
  - b. Dodajte 350 ml otopine za ispiranje u bocu za ispiranje od 500 ml.
4. Na sljedeći način umetnite pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje:
  - a. Gurajte pliticu za ispiranje u hladnjak reagensa dok se ne zaustavi. Zatvorite vratašca hladnjaka reagensa.
  - b. Umetnite bocu za ispiranje pa polako spustite ručku dozatora da bi se dozatori spustili u bocu za ispiranje i bocu za otpad.
  - c. Zatvorite vratašca odjeljka za reagense.
5. Odaberite **Next** (Dalje). Započet će završno ispiranje.

## Nakon ispiranja

Nakon ispiranja iskorišteni protočni članak, pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje s ostatkom otopine za ispiranje ostavite na instrumentu.

**NAPOMENA** Dozatori ostaju na donjem položaju, što je normalno. Neiskorištenu otopinu za ispiranje ostavite u plitici za ispiranje i boci za ispiranje da se dozatori ne bi osušili te da zrak ne bi ušao u sustav.

## Provođenje ispiranja u stanju mirovanja

Ako instrument ne planirate upotrebljavati tijekom sljedećih sedam dana, pripremite ga za neaktivnost ispiranjem u stanju mirovanja. Ispiranjem u stanju mirovanja vodovi fluida pripremaju se za stanje neaktivnosti te se provode dva uzastopna ispiranja eventualnih ostataka reagensa i nakupljenih soli sa svih položaja. Svako ispiranje traje približno 60 minuta. Za ispiranje u stanju mirovanja odvojite približno dva sata.

Po dovršetku ispiranja u stanju mirovanja instrument prelazi u stanje mirovanja te se na početnom zaslonu prikazuje poruka u kojoj se navodi status instrumenta. Ako je instrument u stanju mirovanja, prije pokretanja postupka sekvenciranja mora se provesti ispiranje radi održavanja.

**NAPOMENA** Illumina preporučuje ponavljanje ispiranja u stanju mirovanja *svakih 30 dana* tijekom neaktivnosti instrumenta.

#### **Potrošni materijal koji mora pribaviti korisnik**

- Tween 20 (Sigma-Aldrich, kataloški broj P7949)
- Voda laboratorijske kvalitete ili deionizirana voda (smjernice za vodu laboratorijske kvalitete sadrži dokument *Vodič za pripremu mjesta za MiSeqDx (broj dokumenta 15070066)*)

#### **Postupak**

1. Provjerite je li u instrument umetnut iskorišteni protočni članak.
2. Na početnom zaslonu odaberite **Perform Wash** (Provedi ispiranje).
3. Na zaslonu Wash Options (Mogućnosti ispiranja) odaberite **Standby Wash** (Ispiranje u stanju mirovanja). Softver će automatski podići dozatore u hladnjaku reagensa.

**NAPOMENA** Za svaki korak ispiranja upotrebljavajte svježu otopinu za ispiranje. Ponovnom upotrebom otopine za ispiranje iz prethodnog ispiranja može se vratiti otpad u vodove za fluide.

#### **Provođenje prvog ispiranja**

1. S pomoću sredstva Tween 20 i vode laboratorijske kvalitete na sljedeći način pripremite svježu otopinu za ispiranje:
  - a. Dodajte 5 ml 100-postotnog sredstva Tween 20 u 45 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 10-postotnu otopinu sredstva Tween 20.
  - b. Dodajte 25 ml 10-postotnog sredstva Tween 20 u 475 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 0,5-postotnu otopinu sredstva Tween 20 za ispiranje.
  - c. Promiješajte je tako da je nekoliko puta preokrenete.
2. Na sljedeći način pripremite komponente za pranje uz svježu 0,5-postotnu otopinu sredstva za ispiranje Tween 20:
  - a. U svaki bazen plitice za ispiranje dodajte 6 ml sredstva za ispiranje.
  - b. Dodajte 350 ml otopine za ispiranje u bocu za ispiranje od 500 ml.
3. Umetnite pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje u instrument:
  - a. Otvorite vratašca odjeljka za reagense i vratašca hladnjaka reagensa pa izvucite iskorišteni spremnik reagensa ili pliticu za ispiranje iz hladnjaka.

- b. Gurajte pliticu za ispiranje u hladnjak reagensa dok se ne zaustavi. Zatvorite vratašca hladnjaka reagensa.
- c. Podižite ručku dozatora ispred boce reagensa MiSeqDx SBS Solution (PR2) i boce za otpad dok se ne blokira na mjestu pa zamijenite bocu reagensa MiSeqDx SBS Solution (PR2) bocom za ispiranje.

**NAPOMENA** Bocu reagensa MiSeqDx SBS Solution (PR2) bacite nakon svake obrade.  
Nemojte upotrebljavati preostali reagens MiSeqDx SBS Solution (PR2).

- d. Uklonite bocu za otpad te njezin sadržaj na odgovarajući način odložite u otpad. Vratite bocu za otpad u odjeljak za reagense.
  - e. Polako spustite ručku dozatora da bi se dozatori spustili u bocu za ispiranje i bocu za otpad.
  - f. Zatvorite vratašca odjeljka za reagense.
4. Odaberite **Next** (Dalje). Započet će prvo ispiranje.

## Provođenje drugog ispiranja

1. S pomoću sredstva Tween 20 i vode laboratorijske kvalitete na sljedeći način pripremite svježu otopinu za ispiranje:
  - a. Dodajte 5 ml 100-postotnog sredstva Tween 20 u 45 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 10-postotnu otopinu sredstva Tween 20.
  - b. Dodajte 25 ml 10-postotnog sredstva Tween 20 u 475 ml vode laboratorijske kvalitete. Time ćete dobiti 0,5-postotnu otopinu sredstva Tween 20 za ispiranje.
  - c. Promiješajte je tako da je nekoliko puta preokrenete.
2. Nakon dovršetka prvog ispiranja izvadite pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje te bacite preostalu tekućinu za ispiranje.
3. Na sljedeći način ponovno napunite komponente za pranje svježom 0,5-postotnom otopinom sredstva za ispiranje Tween 20:
  - a. U svaki bazen plitice za ispiranje dodajte 6 ml sredstva za ispiranje.
  - b. Dodajte 350 ml otopine za ispiranje u bocu za ispiranje od 500 ml.
4. Na sljedeći način umetnite pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje:
  - a. Gurajte pliticu za ispiranje u hladnjak reagensa dok se ne zaustavi. Zatvorite vratašca hladnjaka reagensa.
  - b. Umetnite bocu za ispiranje pa polako spustite ručku dozatora da bi se dozatori spustili u bocu za ispiranje i bocu za otpad.
  - c. Zatvorite vratašca odjeljka za reagense.
5. Odaberite **Next** (Dalje). Započet će drugo ispiranje.

## Nakon ispiranja

Nakon ispiranja iskorišteni protočni članak, pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje s ostatkom otopine za ispiranje ostavite na instrumentu.

**NAPOMENA** Dozatori ostaju na donjem položaju, što je normalno. Neiskorištenu otopinu za ispiranje ostavite u plitici za ispiranje i boci za ispiranje da se dozatori ne bi osušili te da zrak ne bi ušao u sustav.

## Isključivanje instrumenta

Najbolje je da instrument uvijek bude uključen. No ako je nužno isključiti instrument, s pomoću sljedećeg postupka isključite Windows te pripremite vodove za fluide.

1. Provedite ispiranje radi održavanja. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Postupak na stranici 30](#).
2. Uklonite bocu za otpad te njezin sadržaj na odgovarajući način odložite u otpad. Vratite bocu za otpad u odjeljak za reagense.
3. Zatvorite vratašca odjeljka za reagense.
4. Na glavnom izborniku odaberite **Shut Down Instrument** (Isključi instrument).  
Tom ćete naredbom isključiti softver instrumenta.
5. Prekidač napajanja prebacite u položaj OFF (Isključeno).

**NAPOMENA** Ako je instrument isključen, pričekajte *najmanje* 60 sekundi prije nego što prekidač napajanja vratite u položaj ON (Uključeno).



# Otklanjanje poteškoća

## Uvod

U ovom se odjeljku opisuju uobičajeni koraci za otklanjanje poteškoća prije obraćanja službi za tehničku podršku tvrtke Illumina. Za većinu se pogrešaka na zaslonu prikazuje poruka s uputama za otklanjanje pogreške.

Ako imate tehničkih pitanja, posjetite stranice podrške za MiSeqDx na web-mjestu tvrtke Illumina. Na stranicama podrške nudi se pristup dokumentaciji, preuzimanjima i čestim pitanjima. Prijavite se na svoj račun za MyIllumina da biste pristupali obavijestima podrške.

Ako imate problema s kvalitetom ili performansama obrade, obratite se službi za tehničku podršku tvrtke Illumina. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Tehnička pomoć na stranici 50](#).

Predstavnici službe za tehničku podršku tvrtke Illumina najčešće će radi otklanjanja poteškoća tražiti kopije datoteka specifičnih za obradu. Putem značajke Bundle Logs (Grupiranje zapisnika) na zaslonu Manage Files (Upravljanje datotekama) možete objediniti datoteke potrebne za otklanjanje poteškoća te ih komprimirati u .zip datoteku.

## Grupiranje zapisnika radi otklanjanja poteškoća

Bundle Logs (Grupiranje zapisnika) značajka je kojom se datoteke grupiraju radi slanja službi za tehničku podršku tvrtke Illumina u svrhu otklanjanja poteškoća. Na kartici Bundle Logs (Grupiranje zapisnika) na zaslonu Manage Files (Upravljanje datotekama) odaberite skupinu odnosno *grupu* datoteka. Grupa se automatski komprimira u zip datoteku.

Značajkom Bundle Logs (Grupiranje zapisnika) datoteke jedne obrade grupiraju se u jednu vrstu grupe. Za svaku obradu i za svaku vrstu grupe koju zatraži služba za tehničku podršku tvrtke Illumina ponovite postupak grupiranja zapisnika.

1. Na zaslonu Manage Files (Upravljanje datotekama) odaberite karticu Bundle Logs (Grupiranje zapisnika).
2. Odaberite **Browse** (Pregledaj) da biste došli do mape MiSeqOutput.
3. Potvrdite okvir pokraj obrade.
4. Odaberite **Bundle Logs** (Grupiraj zapisnike).

Otvorit će se zaslon Bundle Files (Grupiranje datoteka) s informacijama o grupi, uključujući popis pojedinačnih datoteka unutar grupe.

Dodatne informacije o pojedinačnim mapama i datotekama značajke Bundle Logs (Grupiranje zapisnika) potražite u dokumentu *MiSeq Output and Analysis Folders Quick Reference Card (Kratka referentna kartica za izlazne mape sustava MiSeq i mape analize, broj dokumenta 15034791)*.

5. Odaberite **Next** (Dalje).

6. Pronađite lokaciju na koju želite spremi grupirane datoteke kao zip datoteku.
7. Odaberite **Save** (Spremi).  
Kada se dovrši grupiranje datoteka, ponovno će se otvoriti kartica Bundle Logs (Grupiranje zapisnika).
8. Grupu zapisnika u obliku zip datoteke pošaljite službi za tehničku podršku tvrtke Illumina.

## Provođenje provjere sustava

Prije obraćanja službi za tehničku podršku tvrtke Illumina mogu se provesti neke provjere sustava, kao što je testiranje volumena. Testiranjem volumena provjerava se stanje sustava fluida tako što se procjenjuje volumen protoka dok mjehurići prolaze pokraj senzora. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Testiranje volumena na stranici 42](#).



### OPREZ

Za test prevrtanja/nagiba i potpuno testiranje optike potreban je poseban protočni članak te ih smije obavljati samo tehničar tvrtke Illumina.

1. Na glavnom izborniku odaberite **System Check** (Provjera sustava).
2. Učinite nešto od sljedećeg:
  - Odaberite pojedinačne testove koje želite provesti.
  - Odaberite **Select All** (Odaberi sve) da biste proveli sve testove.
3. Odaberite **Next** (Dalje).  
Kada se testiranje dovrši, rezultati testiranja prikazuju se na zaslonu.
4. [neobavezno] Odaberite **Show Details** (Pokaži pojedinosti) da biste pogledali sažetak rezultata na korisničkom sučelju softvera.
5. [neobavezno] Odaberite **Export Results** (Izvezi rezultate) da biste izvezli rezultate kao \*.csv datoteku na USB pogon.
6. Odaberite **Done** (Gotovo).

## Pauziranje ili zaustavljanje obrade

MiSeqDx je osmišljen tako da obradu dovrši od početka do kraja bez intervencije korisnika. No obradu možete paузirati ili zaustaviti putem zaslona Sequencing (Sekvenciranje).

### Pauziranje obrade

Obradu možete privremeno paузirati prije dovršetka. Obrada se, primjerice, može paузirati ako sumnjate da je boca za otpad puna. Paузirane se obrade mogu nastaviti.

Kad odaberete **Pause** (Paузiraj), dovršava se trenutačna naredba, a potom se obrada paузira i protočni se članak postavlja u sigurno stanje.



## OPREZ

Obradu *nemojte* pauzirati tijekom generiranja klastera ni tijekom prvih pet ciklusa sekvenciranja. Obradu pauziranu u to vrijeme nije moguće nastaviti.

Da biste obradu pauzirali sa zaslona Sequencing (Sekvenciranje), odaberite **Pause** (Pauziraj). Natpis na gumbu promijenit će se u **Resume** (Nastavi).

Kada želite nastaviti obradu, odaberite **Resume** (Nastavi).


## Zaustavljanje obrade

Obradu tijekom sekvenciranja možete zaustaviti i prije dovršetka s pomoću gumba **Stop** (Zaustavi) na zaslonu Sequencing (Sekvenciranje). Obradu možete zaustaviti ako je pogrešno postavljena, ako je kvaliteta podataka loša ili ako dođe do kvara hardvera.

Kada se obrada zaustavi, trenutačna se naredba ne dovršava, a nosač protočnog članka pomiče se u prednji položaj. Nastavlja se primarna analiza zadnjeg dovršenog ciklusa.

Da biste zaustavili obradu sa zaslona Sequencing (Sekvenciranje), odaberite **Stop** (Zaustavi). Kada se obrada zaustavi, trenutačna se naredba ne dovršava, a nosač protočnog članka pomiče se u prednji položaj. Nastavlja se primarna analiza zadnjeg dovršenog ciklusa.

Slika 16 Zaustavljanje obrade

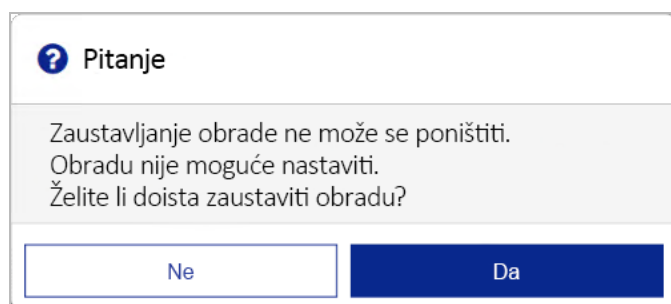

*Zaustavljanje obrade ne može se poništiti.* Zaustavljena obrada ne može se nastaviti. Jedina je mogućnost nastaviti na ispiranje instrumenta.

## Ručno podizanje dozatora sa spremnika reagensa

Ako se obrada neočekivano prekine ili ako tijekom obrade dođe do pogreške, dozatori sa spremnika reagensa možda se neće automatski podići. Da biste izvadili spremnik reagensa, ručno podignite dozatore sa spremnika reagensa.

1. Na početnom zaslonu odaberite **Perform Wash** (Provedi ispiranje).
2. Odaberite **Raise Sippers** (Podigni dozatore).
3. Izvadite spremnik reagensa.

## Otklanjanje pogrešaka u postavljanju obrade

Ako neka od provjera prije obrade ne uspije, pokraj te stavke prikazat će se crvena ikona **X**. Na zaslonu će se prikazati poruka s opisom pogreške i uputama za njezino otklanjanje.

Pogreška	Radnja
<b>X Flow Rate Measured</b> (Izmjeren protok)	<p>Otvara se zaslon za provjeru protoka. S pomoću padajućeg popisa ili zaslonske tipkovnice unesite sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Otopina: <b>PR2</b></li> <li>Volume (Volumen): <b>250</b></li> <li>Aspirate Rate (Brzina aspiracije): <b>2500</b></li> <li>Dispense Rate (Brzina izbacivanja): <b>2500</b></li> </ul> <p>Odaberite <b>Pump</b> (Pumpaj). Ako se pogreška i dalje pojavljuje, volumen pumpanja reagensa MiSeqDx SBS Solution (PR2) postavite na 500 µl i ponovite postupak. Nakon upumpavanja fluida odaberite <b>Restart Check</b> (Ponovno pokreni provjeru).</p> <p>Kad provjera prije obrade uspije, gumb <b>Start Run</b> (Pokreni obradu) postat će aktivan.</p> <p>Ako provjera protoka ponovno ne uspije, ponovno postavite protočni članak da biste provjerili nije li protok prekinut zbog nepravilnog poravnjanja. Provjerite da na brtvi protočnog članka nema dlačica ili nepravilnosti.</p>
<b>X Free Disk Space</b> (Slobodan prostor na disku)	<p>Ako nema dovoljno prostora na disku, prikazat će se poruka u kojoj se navodi koliko je prostora na disku potrebno. S pomoću značajke <b>Manage Files</b> (Upravljanje datotekama) oslobodite potrebnu količinu prostora na računalu instrumenta.</p>
<b>X Network Connection Active</b> (Aktivna mrežna veza)	<p>Provjerite je li mrežni kabel priključen u instrument.</p> <p>Ako se time ne uspostavi mrežna veza, na zaslonu Manage Instrument (Upravljanje instrumentom) odaberite <b>Reboot</b> (Ponovno pokreni) da biste ponovno pokrenuli softver.</p> <p>Ako se veza i dalje ne može uspostaviti, na zaslonu Manage Instrument (Upravljanje instrumentom) odaberite <b>Shut Down</b> (Isključi) pa isključite instrument putem prekidača napajanja. Pričekajte najmanje 60 sekundi, a potom uključite instrument i pokrenite softver.</p>
<b>X Primary Analysis Ready</b> (Spremnost primarne analize)	<p>Nije dovršena primarna analiza prethodne obrade. Zadano vrijeme za dovršetak primarne analize iznosi jedan sat – na zaslonu se prikazuje brojač vremena. Možete pričekati jedan sat ili odabrati <b>Terminate Analysis</b> (Prekini analizu). Zaustavit će se sekundarna analiza svih nedovršenih ciklusa.</p>

## Otklanjanje pogreške zbog neuspješnog očitavanja RFID-a

Pogreške RFID-a aktiviraju se u sljedećim situacijama:

- umetnuta komponenta nije dio kompleta za *in vitro* dijagnostiku
- umetnuta komponenta nije dio kompleta navedenog u modulu softvera Local Run Manager
- došlo je do tehničkog kvara pri očitavanju RFID oznake na komponenti

Da biste riješili kvarove čiji je uzrok tehnički kvar, možete učiniti sljedeće.

**NAPOMENA** Tijekom dijagnostičke obrade dopuštena je jedna pogreška očitavanja RFID-a. Ako nije moguće očitati RFID na dvije komponente potrošnog materijala, softver ne može nastaviti na sljedeći korak postavljanja obrade. Ako dođe do te pogreške, obratite se službi za tehničku podršku tvrtke Illumina.

### Protočni članak

1. Prije nastavka obavezno ponovno pokušajte očitati RFID. Da biste to učinili, otvorite i zatvorite vratašca odjeljka za protočni članak.
2. Ako i očitavanje RFID-a ne uspije ni drugi put, odaberite **Get Code** (Dohvaćanje koda). Obratite se službi za tehničku podršku tvrtke Illumina da biste nabavili kod za zaobilaženje RFID-a. Privremeni kod za zaobilaženje istječe nakon sedam dana.
3. S pomoću zaslonske tipkovnice unesite privremeni kod za zaobilaženje.
4. Odaberite **Next** (Dalje).
5. Unesite sljedeće podatke:
  - broj barkoda protočnog članka, koji se nalazi na naljepnici spremnika za protočni članak izravno ispod samog barkoda
  - broj dijela protočnog članka
6. Odaberite **Next** (Dalje) da biste nastavili na zaslon Load the Flow Cell (Umetanje protočnog članka).
7. Odaberite **Next** (Dalje) da biste nastavili na sljedeći korak postavljanja obrade.

### Boca reagensa MiSeqDx SBS Solution (PR2)

1. Prije nastavka obavezno ponovno pokušajte očitati RFID. Da biste to učinili, podignite, a potom spustite ručku dozatora.
2. Ako i očitavanje RFID-a ne uspije ni drugi put, odaberite **Get Code** (Dohvaćanje koda). Obratite se službi za tehničku podršku tvrtke Illumina da biste nabavili kod za zaobilaženje RFID-a. Privremeni kod za zaobilaženje istječe nakon sedam dana.
3. S pomoću zaslonske tipkovnice unesite privremeni kod za zaobilaženje.
4. Odaberite **Next** (Dalje).
5. Unesite sljedeće podatke:

- Broj barkoda boce reagensa MiSeqDx SBS Solution (PR2), koji se nalazi na naljepnici boce reagensa MiSeqDx SBS Solution (PR2) odmah ispod barkoda
  - Broj dijela boce reagensa MiSeqDx SBS Solution (PR2)
6. Odaberite **Next** (Dalje) da biste nastavili na zaslon Load Reagents (Umetanje reagensa).
  7. Odaberite **Next** (Dalje) da biste nastavili na sljedeći korak postavljanja obrade.

### Spremnik reagensa

1. Prije nastavka obavezno ponovno pokušajte očitati RFID. Da biste to učinili, otvorite, a potom zatvorite vratašca hladnjaka reagensa.
2. Ako i očitavanje RFID-a ne uspije ni drugi put, odaberite **Get Code** (Dohvaćanje koda). Obratite se službi za tehničku podršku tvrtke Illumina da biste nabavili kod za zaobilaženje RFID-a. Privremeni kod za zaobilaženje istječe nakon sedam dana.
3. S pomoću zaslonske tipkovnice unesite privremeni kod za zaobilaženje.
4. Odaberite **Next** (Dalje).
5. Unesite sljedeće podatke:
  - broj barkoda kompleta reagensa, koji se nalazi na naljepnici kompleta izravno ispod barkoda
  - broj dijela kompleta reagensa
6. Odaberite **Next** (Dalje) da biste se vratili na zaslon Load Reagents (Umetanje reagensa).
7. Odaberite **Next** (Dalje) da biste nastavili na sljedeći korak postavljanja obrade.

## Sprječavanje ponovnog pokretanja tijekom obrade

Ako se MiSeqDx ponovno pokrene tijekom obrade, to može značiti da je softver Windows Update na mreži konfiguriran tako da automatski instalira ažuriranja softvera. Tu je postavku bilo potrebno isključiti tijekom instalacije. Za pomoć pri onemogućivanju automatskih ažuriranja operacijskog sustava Windows u pozadini instrumenta MiSeqDx obratite se lokalnom informatičkom odjelu.

## Otklanjanje poteškoća zbog pogreške protoka

Protok je brzina kojom tekućine prolaze kroz sustav fluida ( $\mu\text{l}/\text{min}$ ). Mjeri se prije svake obrade tijekom provjere prije obrade. Ako sustav ne može izmjeriti protok, upumpajte određeni volumen reagensa (MiSeqDx SBS Solution (PR2)) kroz sustav prije ponovne provjere protoka.

1. S pomoću padajućeg popisa ili zaslonske tipkovnice unesite sljedeće podatke:
  - Solution (Otopina): **PR2**
  - Volume (Volumen): **250  $\mu\text{l}$**
  - Aspirate Rate (Brzina aspiracije): **2500  $\mu\text{l}/\text{min}$**
  - Dispense Rate (Brzina izbacivanja): **2500  $\mu\text{l}/\text{min}$**
2. Odaberite **Pump** (Pumpaj).

3. Kad završi korak pumpanja, odaberite **Restart Check** (Ponovno pokreni provjeru).
4. Ako se pogreška i dalje pojavljuje, volumen pumpanja reagensa MiSeqDx SBS Solution (PR2) postavite na 500 µl pa još jedanput ponovite postupak. Ako ni iz drugog pokušaja ne uspijete otkloniti pogrešku, obratite se službi za tehničku podršku tvrtke Illumina.

## Testiranje volumena

Zapreka u vodovima za fluide može uzrokovati slab dovod reagensa te utjecati na rezultate sekvenciranja. Ako sumnjate na zapreku u vodovima za fluide, testirajte volumen.

Testiranjem volumena provjerava se stanje sustava fluida tako što se procjenjuje volumen između mjehurića koji prolaze pokraj senzora. Da biste testirali volumen, u instrument moraju biti umetnuti plitica za ispiranje i boca za ispiranje s vodom laboratorijske kvalitete te iskorišten protočni članak. Da biste proveli testiranje, slijedite upute na zaslonu.

1. Provjerite je li u instrument umetnut iskorišteni protočni članak.
2. Na glavnom izborniku odaberite **System Check** (Provjera sustava).
3. Odaberite **Conduct Volume Test** (Provedi testiranje volumena), a potom **Next** (Dalje).
4. Svaki bazen plitice za ispiranje ispunite sa 6 ml vode laboratorijske kvalitete.
5. Bocu za ispiranje od 500 ml napunite s 350 ml vode laboratorijske kvalitete.
6. Umetnite pliticu za ispiranje i bocu za ispiranje u instrument.
  - a. Otvorite vratašca odjeljka za reagense i vratašca hladnjaka reagensa pa gurajte pliticu za ispiranje u hladnjak reagensa dok ne zastane. Zatvorite vratašca hladnjaka reagensa.
  - b. Podižite ručku dozatora dok se ne blokira na mjestu pa umetnite bocu za ispiranje.
  - c. Uklonite bocu za otpad te njezin sadržaj na odgovarajući način odložite u otpad. Vratite bocu za otpad u odjeljak za reagense.
  - d. Polako spustite ručku dozatora da bi se dozatori spustili u bocu za ispiranje i bocu za otpad.
7. Slijedite upute na zaslonu pa na sljedeći način uklonite eventualne kapljice boce za ispiranje:
  - a. Na upit polako podignite ručku dozatora te provjerite nalazi li se na dozatoru boce za ispiranje velika kap vode.
  - b. Na upit polako spustite ručku dozatora u vodu do te razine da površinska napetost ukloni kap.
  - c. Na upit polako podignite ručku dozatora te provjerite nalazi li se na dozatoru boce za ispiranje velika kap vode.
  - d. Na upit polako spustite ručku dozatora do kraja da bi se dozatori spustili u bocu za ispiranje i bocu za otpad.
8. Odaberite **Next** (Dalje). Pokrenut će se testiranje volumena.  
 Nakon dovršetka testiranja volumena na zaslonu se prikazuju rezultati.  
 Ako testiranje nije bilo uspješno, provedite ispiranje radi održavanja. Pročitajte odjeljak [Postupak na stranici 30](#).
9. Nakon dovršetka ispiranja radi održavanja ponovite testiranje volumena.

## Rješavanje pogrešaka s temperaturom hladnjaka reagensa

Potrebni je temperaturni raspon hladnjaka reagensa od 2 °C do 11 °C. Indikator senzora pokazuje temperaturu hladnjaka reagensa. Pročitajte odjeljak [Indikatori senzora na stranici 5](#).

Ako se pojavi poruka o pogrešci da temperatura hladnjaka nije u navedenom temperaturnom rasponu, obratite se tehničkoj podršci tvrtke Illumina.

Ako temperatura hladnjaka nije unutar navedenog raspona, obrada sekvenciranjem možda se neće moći pokrenuti. Ako poruku o pogrešci primite tijekom obrade sekvenciranjem, pričekajte da obrada završi.

Dodatne informacije o hladnjaku reagensa potražite u odjeljku [Odjeljak za reagense na stranici 3](#).

## Rješavanje pogrešaka analize softvera Local Run Manager

Informacije o otklanjanju poteškoća u vezi s pogreškama analize zatražite od tehničke podrške tvrtke Illumina. Upute za ponovno stavljanje analize u red čekanja sadrži *Referentni priručnik za softver Local Run Manager za MiseqDx (broj dokumenta 200003931)*.

## Konfiguriranje postavki sustava

MOS sadrži kartice s kojih se pristupa naredbama za konfiguriranje sustava.

- Postavke IP-a i DNS-a konfiguriraju se na kartici IP. Za upotrebu te značajke potreban je pristup razine administratora sustava Windows.
- Postavke mreže i pokretanja konfiguriraju se na sljedećim karticama:
  - Network Credentials (Vjerodajnice za mrežu) – za upotrebu te značajke potreban je pristup razine administratora sustava Windows.
  - Start-Up Options (Mogućnosti pokretanja) – za upotrebu te značajke potreban je pristup razine administratora softvera Local Run Manager.

Te se postavke sustava najčešće konfiguriraju tijekom instalacije instrumenta MiSeqDx.



## Konfiguriranje postavki IP-a i DNS-a

Ako je to potrebno zbog promjene mreže ili ustanove, konfigurirajte IP adresu i adrese DNS poslužitelja. Za konfiguriranje te značajke potreban je pristup razine administratora sustava Windows.

1. Na glavnom izborniku odaberite **System Settings** (Postavke sustava).
2. Odaberite karticu IP, a zatim jednu od sljedećih mogućnosti da biste postavili IP adresu:
  - **Obtain an IP address automatically** (Automatski dohvati IP adresu) – tu mogućnost odaberite da bi se IP adresa dohvaćala automatski putem DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) poslužitelja.

**NAPOMENA** DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) standardni je mrežni protokol koji se upotrebljava na IP mrežama za dinamičku raspodjelu mrežnih konfiguracijskih parametara.

- **Use the following IP address** (Upotrebljavaj sljedeću IP adresu) – tu mogućnost odaberite ako instrument s drugim poslužiteljem želite povezati ručno, i to na sljedeći način. Da biste saznali koje adrese pripadaju baš vašoj ustanovi, obratite se mrežnom administratoru.
    - Unesite IP adresu. IP adresa niz je od četiri broja odijeljenih točkom, primjerice 168.62.20.37.
    - Unesite masku podmreže, što je daljnja podjela IP mreže.
    - Unesite zadani pristupnik, tj. mrežni usmjerivač koji se povezuje s internetom.
3. Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti da biste postavili adresu DNS-a:
    - **Obtain a DNS address automatically** (Automatski dohvati adresu DNS-a) – čita adresu DNS-a povezanu s IP adresom.
    - **Use the following DNS addresses** (Upotrebljavaj sljedeće adrese DNS-a) – instrument povezuje s poslužiteljem koji nazive domena prevodi u IP adrese.
      - Unesite željenu adresu DNS-a. Adresa DNS-a naziv je poslužitelja koji se upotrebljava za prevođenje naziva domena u IP adrese.
      - Unesite rezervnu adresu DNS-a. Rezerva se upotrebljava ako željeni DNS ne može prevesti određeni naziv domene u IP adresu.
  4. Odaberite **Save** (Spremi).

## Konfiguriranje postavki mreže i pokretanja

Postavke mreže i pokretanja možete konfigurirati na kartici Network Credentials (Vjerodajnice za mrežu) (za upotrebu te značajke potreban je pristup razine administratora sustava Windows) te na kartici Start-Up Options (Mogućnosti pokretanja) (potreban je pristup razine administratora softvera Local Run Manager).

1. Na glavnom izborniku odaberite **System Settings** (Postavke sustava).
2. Odaberite karticu Network Credentials (Vjerodajnice za mrežu) pa na sljedeći način konfigurirajte mrežne postavke.
3. Naziv računala dodjeljuje se računalu instrumenta u trenutku proizvodnje. Najčešće nije potrebno mijenjati naziv računala. Promjene naziva računala na ovom zaslonu mogu utjecati na povezivanje te je za njih potrebno unijeti korisničko ime i lozinku administratora mreže.  
Naziv računala bilježi se kao naziv instrumenta u rezultatima softvera Local Run Manager.
4. Na sljedeći način povežite računalo instrumenta s domenom ili radnom grupom.
  - **Za instrumente povezane s internetom** – odaberite **Domain** (Domena), a zatim unesite naziv domene povezane s internetskom vezom u vašoj ustanovi.
  - **Za instrumente koji nisu povezani s internetom** – odaberite **Work Group** (Radna grupa), a zatim unesite naziv radne grupe.
5. Odaberite karticu Start-Up Options (Mogućnosti pokretanja), a potom jednu od sljedećih mogućnosti:
  - **Kiosk Mode** (Način rada kioska, preporučeno) – prikazuje sučelje upravljačkog softvera preko cijelog zaslona. Softver je namijenjen za upotrebu u načinu rada kioska.
  - **Windows Mode** (Način rada za Windows) – omogućuje pristup sustavu Windows na računalu instrumenta. U tom načinu rada interakcija sa sučeljem softvera, primjerice položaj gumba, može biti drukčija.
6. Odaberite **Save** (Spremi).

# Izlazne mape

## Mape obrade

Svakom obradom na instrumentu MiSeqDx generiraju se tri mape obrade, a svaka od njih ima specifičnu svrhu:

- **D:\Illumina\MiSeqTemp** – kad započne obrada, na lokalni disk računala instrumenta zapisuje se privremena mapa obrade koja služi kao radno područje za MOS i RTA. Mapi Temp nije potrebno pristupati. Sadržaj te mape briše se nakon sedam dana.
- **D:\Illumina\MiSeqOutput** – RTA kopira datoteke iz mape Temp u mapu Output. Kad se generiraju datoteke primarne analize, RTA datoteke kopira natrag u mapu Temp te popunjava mapu Analysis. Fokusirane slike i minijature slika ne kopiraju se u mapu Analysis.
- **D:\Illumina\MiSeqAnalysis** – kad se dovrši primarna analiza, Local Run Manager pristupa mapi Analysis na lokalnom disku instrumenta da bi započeo sekundarnu analizu. Sve datoteke zapisane u mapu Analysis kopiraju se u mapu Output.

## Naziv korijenske mape

Naziv korijenske mape sadržava datum obrade, broj instrumenta te protočni članak upotrijebljen za obradu. Mapa svake obrade sadrži isti naziv korijenske mape.

Naziv mape po zadanim postavkama izgleda ovako:

GGMMDD\_<InstrumentNumber>\_<Run Number>\_A<FlowCellBarcode>

Broj obrade povećava se za jedan nakon svake obrade na tom instrumentu.

# Kazalo

## B

boca za otpad 3

## C

ciklusi sekvenciranja 24

ciklusi u očitanju 13

## D

DNS adresa 44

dokumentacija 50

duljina očitavanja 13

duljina očitavanja 13

## F

fluidi

ispiranje 29, 32

otklanjanje poteškoća 41-42

## G

generiranje klastera 24

generiranje predložaka 24

grupiranje zapisnika 36

gustoća klastera 22

## H

hladnjak reagensa, temperatura 5

## I

ikone

senzori 5

indikator senzora 5

intenziteti 24

IP adresa 44

isključivanje instrumenta 29, 35

ispiranja

koristi 24

nakon obrade 24

održavanje 29

postavke ispiranja nakon obrade 9-10

prednosti 29

priprema za isključivanje 35

pripremanje za neaktivnost 32

radi održavanja 9-10

stanje mirovanja 33

u stanju mirovanja 29

ispiranje nakon obrade 24, 29

ispiranje radi održavanja 29

ispiranje u stanju mirovanja 33

## K

komponente

odjeljak za protočni članak 1-2

odjeljak za reagense 1, 3

optički modul 1

protočni članak 2

## L

list s uzorcima 39

## M

mape obrade

dodjela naziva 46

temp, izlaz, analiza 46

mogućnosti obrade 9-10

mrežna veza 39

mrežne postavke 44

## N

način rada kioska 45

način rada u prozoru 45

način rada za istraživanje 6

nadzor obrade 22  
 naziv domene 44-45  
 naziv radne grupe 45

## O

ocjene kvalitete 22, 24  
 odjeljak za protočni članak 1-2  
 odjeljak za reagense 1, 3  
 optički modul 1  
 otklanjanje poteškoća  
     datoteke specifične za obradu 36  
     fluidi 42  
     grupiranje zapisnika 36  
     pogreške u postavljanju obrade 39  
     protok 41  
     RFID 40

## P

pauziranje obrade 37  
 podaci o radnim karakteristikama  
     instrumenta 9  
 podrška korisnicima 50  
 pokretanje obrade 9  
 pomoć, tehnička 50  
 ponovno pokretanje 6  
 ponovno pokretanje u način rada za  
     istraživanje 6  
 postavke sustava 9, 43  
 Postavke sustava 44-45  
 potrošni materijal  
     koji isporučuje Illumina 11  
     voda laboratorijske kvalitete 12  
 Potrošni materijal  
     mora pribaviti korisnik 11  
 potrošni materijal koji mora pribaviti  
     korisnik 11  
 PR2, umetanje 19  
 pravilnici o ograničenju softvera 6  
 priprema instrumenta za neaktivnost 32  
 prolaznost kroz filter 24

prostor na disku  
     malo prostora na disku 39  
     provjera 5  
 protočni članak 17  
     čišćenje 16  
     pregled 2  
 protok, otklanjanje poteškoća 41

## R

reagensi  
     u kompletu 11  
 Real-Time Analysis Software 3  
     generiranje predložaka 24  
     mapa obrade 46  
 RFID  
     otklanjanje poteškoća 40  
     PR2 19  
     spremnik reagensa 20  
 RFID protočnog članka 17  
 RFID SBS otopine 19  
 ručka dozatora 3

## S

SBS otopina, umetanje 19  
 senzor vratašca protočnog članka 5  
 servis za praćenje Illumina Proactive 9  
 smjernice za vodu laboratorijske kvalitete 12  
 softver  
     Local Run Manager 3, 5  
     MiSeqDx Operating Software 3  
     na instrumentu 3  
     provjera prostora na disku 5  
     Real-Time Analysis 3  
     trajanje obrade 13  
 softver Local Run Manager 3, 5  
 softver MiSeq Operating System 3  
 SRP 6

## T

tehnička pomoć 50

testiranje volumena 42  
tijek rada  
    trajanje obrade 13  
trajanje obrade 13

## **U**

umetanje reagensa  
    PR2 19  
    SBS otopina 19  
    spremnik 20  
upozorenja e-poštom 10  
upravljanje instrumentom  
    domena 45  
    IP i DNS adresa 44  
    mogućnosti pokretanja 45  
    naziv domene 44  
    naziv računala 45  
    postavke sustava 44  
    radna grupa 45

## **Z**

zaslon za sekvenciranje 22  
zasun protočnog članka 2  
zaustavljanje obrade 38

# Tehnička pomoć

Ako vam je potrebna tehnička pomoć, obratite se službi za tehničku podršku tvrtke Illumina.

**Web-mjesto:** [www.illumina.com](http://www.illumina.com)  
**Adresa e-pošte:** [techsupport@illumina.com](mailto:techsupport@illumina.com)

## Telefonski brojevi službe za tehničku podršku korisnicima tvrtke Illumina

Regija	Besplatni telefon	Međunarodni
Australija	+61 1800 775 688	
Austrija	+43 800 006249	+43 1 9286540
Belgija	+32 800 77 160	+32 3 400 29 73
Danska	+45 80 82 01 83	+45 89 87 11 56
Filipini	+63 180016510798	
Finska	+358 800 918 363	+358 9 7479 0110
Francuska	+33 8 05 10 21 93	+33 1 70 77 04 46
Hong Kong, Kina	+852 800 960 230	
Indija	+91 8006500375	
Indonezija		0078036510048
Irska	+353 1800 936608	+353 1 695 0506
Italija	+39 800 985513	+39 236003759
Japan	+81 0800 111 5011	
Južna Koreja	+82 80 234 5300	
Kanada	+1 800 809 4566	
Kina		+86 400 066 5835
Malezija	+60 1800 80 6789	
Nizozemska	+31 800 022 2493	+31 20 713 2960
Njemačka	+49 800 101 4940	+49 89 3803 5677
Norveška	+47 800 16 836	+47 21 93 96 93
Novi Zeland	+64 800 451 650	
Singapur	1 800 5792 745	

Regija	Besplatni telefon	Međunarodni
Sjedinjene Američke Države	+1 800 809 4566	+1 858 202 4566
Španjolska	+34 800 300 143	+34 911 899 417
Švedska	+46 2 00883979	+46 8 50619671
Švicarska	+41 800 200 442	+41 56 580 00 00
Tajland	+66 1800 011 304	
Tajvan, Kina	+886 8 06651752	
Velika Britanija	+44 800 012 6019	+44 20 7305 7197
Vijetnam	+84 1206 5263	

**Sigurnosno-tehnički listovi (SDS-ovi)** – dostupni su na web-mjestu tvrtke Illumina na adresi [support.illumina.com/sds.html](http://support.illumina.com/sds.html).


**Dokumentacija o proizvodima** – dostupna je za preuzimanje na web-mjestu [support.illumina.com](http://support.illumina.com).





Illumina  
5200 Illumina Way  
San Diego, California 92122 SAD  
+1.800.809.ILMN (4566)  
+1.858.202.4566 (izvan Sjeverne Amerike)  
techsupport@illumina.com  
www.illumina.com

CE

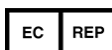

Illumina Netherlands B.V.  
Steenoven 19  
5626 DK Eindhoven  
Nizozemska

**Australski sponzor**

Illumina Australia Pty Ltd  
Nursing Association Building  
Level 3, 535 Elizabeth Street  
Melbourne, VIC 3000  
Australija

ZA IN VITRO DIJAGNOSTIKU

© 2021. Illumina, Inc. Sva prava pridržana.

**illumina**<sup>®</sup>